

MODELO DRUCKER 642B CENTRÍFUGA CON ROTOR HORIZONTAL DE UNA VELOCIDAD



Produce separaciones de muestras de alta calidad a nuestro precio más económico. En su simplicidad, las configuraciones de una velocidad y el temporizador mecánico ajustable de la centrífuga 642B satisfacen una variedad de necesidades de preparación de especímenes sanguíneos. El diseño exclusivo del rotor permite el procesamiento horizontal con un mantenimiento mínimo y sin complicaciones.

Un Excelente Precio

Calidad insuperable para cualquier presupuesto. Cada unidad viene lista para funcionar, incluye un rotor, soportes para tubos y una garantía de 2 años en un precio económico.

Fácil de Usar

La centrífuga 642B ofrece un procesamiento de una velocidad poderoso con un temporizador mecánico fácilmente ajustable. Configurada para funcionar a una velocidad constante de 1.600 xg, la centrífuga 642B permite la selección de una duración de ciclo de entre 1 y 30 minutos.

Operación con Sistema del Aire

El diseño único de la carcasa del motor y de la cámara de rotación mantiene los especímenes frescos durante su procesamiento.

Construida para Durar

Los componentes reforzados y el motor sin escobillas proporcionan años de operación sin mantenimiento. La tapa transparente irrompible mejora la seguridad en el laboratorio.

Para una Mejor Repetibilidad

Cuando la uniformidad sea clave, por favor considere la centrífuga electrónica de una velocidad **642E**. La centrífuga 642E es la centrífuga de laboratorio clínico más vendida del mundo y cuenta con una interfaz simple de dos botones y un tiempo de procesamiento preestablecido para todas las necesidades bioquímicas comunes.




Modelo 642E


Rotor Horizontal de 2 Etapas

Nuestro diseño patentado de rotor horizontal oscilante incorpora un exclusivo soporte para tubos de análisis que produce las muestras ideales separadas horizontalmente.

Ángulo de carga

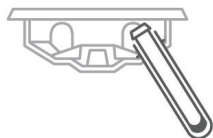

Ángulo de rotación

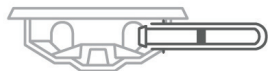


Tubos	Aplicaciones	Centrifugado	Incluye	Garantía
6 75-100 mm 0,5-10 mL	Bioquímica, Coagulación, Plasma Bajo en Plaquetas (PPP)	Horizontal 1.600 xg RCF máx. 3.400 RPM máx.	Rotor, Vasos, Soportes para tubos	2 años Rotor: garantía de por vida Garantía ampliada disponible

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

MODELO DRUCKER 642B

642B	Números de las partes
Centrífuga	00-016-009-001
Soporte para tubos de 75-100 mm	7713079 (1 cantidad)
Plataforma SmartView	00-079-009-001
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0001
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0002
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0006

642B	Especificaciones
Nivel de Sonido	65 dBA
Dimensiones	11,75 x 14 x 8,75 pulg. 30 x 35.5 x 22 cm
Peso	11 lbs (5 kg)
Aceleración máx.	10 segundos
Desaceleración máx.	80 segundos
Potencia	115 V – 50/60 Hz

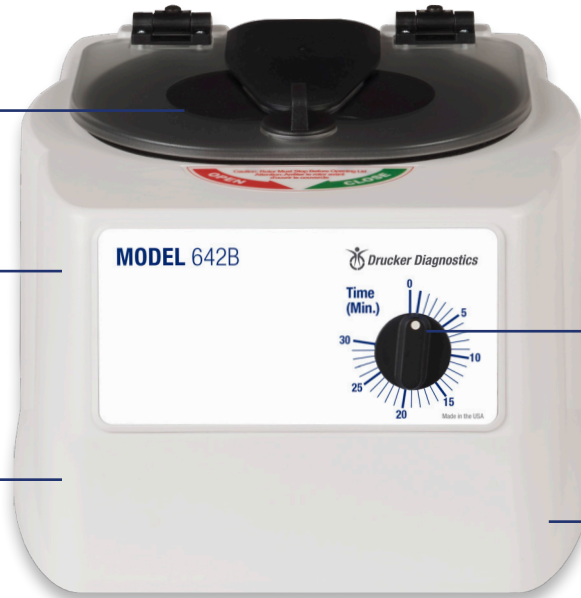

Observe las muestras de forma segura a través de la tapa transparente y desrompible

Recipiente protector reforzado y motor sin escobas en carbono para una operación silenciosa y libre de mantenimiento

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire

El temporizador mecánico fácilmente ajustable puede ser programado para entre 1 y 30 minutos

Procesamiento uniforme a 1.600 xg (3.400 RPM)

OTROS MODELOS DE DRUCKER



642E

La centrífuga de laboratorio número 1 en el mundo
Para sangre



HORIZON 6

3 ciclos, disponible para 6, 12 y 24 tubos
Para sangre y orina



HORIZON 6 Flex

Pantalla digital, disponible para 6, 12 y 24 tubos
10 ciclos, para sangre y orina

LISTADO
EN LA FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

