

## MODELO DRUCKER 642M CENTRÍFUGA *MÓVIL DE 12V DC*

La centrífuga 642M facilita rutas eficientes y un mayor alcance para los flebotomistas itinerantes al proporcionar la posibilidad de realizar centrifugados en su vehículo. Centrifugue los especímenes dentro de las dos horas siguientes a su extracción y siga con la ruta más conveniente sin necesidad de regresar al laboratorio central. Al abastecerse de energía directamente del suministro eléctrico de 12V del vehículo, la centrífuga 642M proporciona un centrifugado horizontal para una separación de alta calidad del tubo de gel y una operación de dos botones para una máxima repetibilidad.



### Fácil de Usar

La interfaz simple procesa el ciclo preestablecido (10 minutos a 3.400 RPM/1.600 xg) con tan solo presionar un botón. El tiempo de procesamiento puede ser ajustado entre 1 y 30 minutos.

### Diseñada para el Centrifugado Móvil

Al contar con una centrífuga en su vehículo, los flebotomistas tienen la libertad de planificar una ruta para todo el día sin regresar al laboratorio. Este dispositivo asequible puede aumentar inmensamente el rango de servicio y productividad sin sacrificar la calidad de los especímenes ni los resultados del paciente.

### Construida para Durar

No necesita mantenimiento de rutina. El motor sin escobillas y el exclusivo sistema de enfriamiento por convección garantizan años de separaciones de alta calidad.

### Diseñada para la Seguridad

Garantice una máxima seguridad con la tapa transparente irrompible que se bloquea hasta que la centrífuga se haya detenido por completo.


### Un Excelente Precio

Cada unidad viene lista para funcionar con un rotor horizontal, soportes universales para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.


### Rotor Horizontal de 2 Etapas

Nuestro diseño patentado de rotor oscilante incorpora un exclusivo soporte para tubos de análisis que produce muestras horizontalmente separadas ideales para el transporte.

#### Ángulo de carga

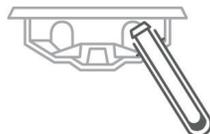

#### Ángulo de rotación

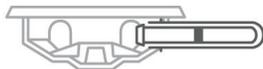

Tubos	Aplicaciones	Centrifugado	Incluye	Garantía
6 75-100 mm (3-10 mL)	Bioquímica, Coagulación, Plasma Bajo en Plaquetas (PPP)	Horizontal 1.600 xg RCF máx. 3.400 RPM máx.	Rotor, Soportes para Tubos	2 años Rotor: garantía de por vida Garantía ampliada disponible

**Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.**

# MODELO DRUCKER 642M


642M	Números de las partes
Centrífuga	00-077-009-000
Soporte para tubos de 75-100 mm	7713079 (1 cantidad)
Plataforma SmartView	00-079-009-001
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0001
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0002
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0006

642M	Especificaciones
Nivel de Sonido	65 dBA
Dimensiones	11,75 x 14 x 8,75 pulg. 30 x 35.5 x 22 cm
Peso	12 lbs (5,4 kg)
Aceleración máx.	10 segundos
Desaceleración máx.	20 segundos
Potencia	12V

La tapa de seguridad se bloquea automáticamente durante la operación y no podrá ser abierta hasta que la centrífuga se haya detenido

Recipiente protector reforzado para una máxima seguridad

Cable de 12V DC para uso en vehículos

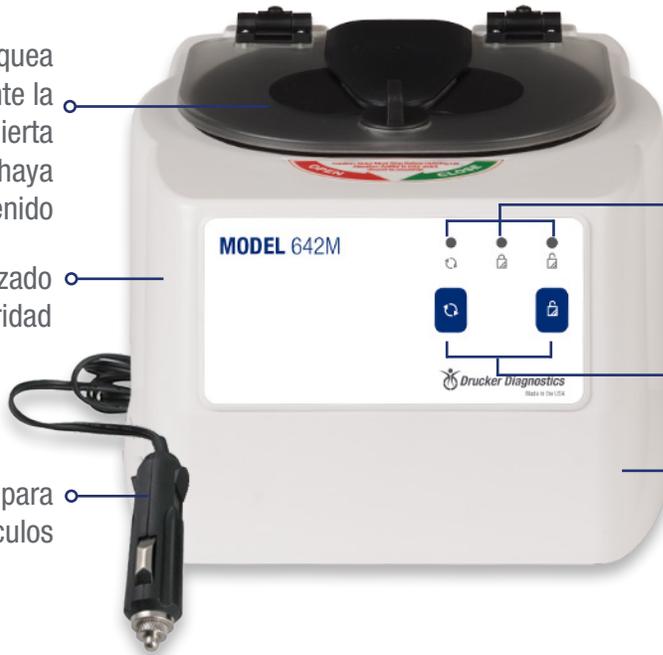

Las luces LED se encienden para indicar que la centrífuga está en funcionamiento, bloqueada o desbloqueada

Operación simple de dos botones

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire

## Garantice la protección adicional de los especímenes transportados con las cajas de seguridad SampleSafe™ de Drucker



Caja de seguridad de carga superior

Caja de seguridad de carga frontal

Las temperaturas extremas pueden volver inutilizables a los especímenes en tan solo 15 minutos, lo que presenta un problema único para los flebotomistas itinerantes. La SampleSafe™ de Drucker ofrece una solución. Incluso en vehículos calientes o fríos, la SampleSafe preserva la integridad de los especímenes hasta por 24 horas y permite que usted pueda llegar a más pacientes.

**SampleSafe™ de carga superior:** Número de parte 00-071-009-000

**SampleSafe™ de carga frontal:** Número de parte 00-078-009-000

**LISTADO EN LA FDA**

**RoHS Compliant**



**ISO13485 certified**



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

