

## DRUCKER MODÈLE 642M CENTRIFUGEUSE MOBILE 12 VCC

La 642M permet aux phlébotomistes itinérants d'optimiser et d'allonger leurs tournées en leur offrant la possibilité de réaliser des centrifugations dans leur véhicule. Centrifugez les échantillons dans les deux heures qui suivent le prélèvement et suivez l'itinéraire le plus pratique sans avoir à repasser par le laboratoire central. Directement alimentée par la prise 12 V d'un véhicule, la centrifugeuse horizontale 642M permet d'obtenir une séparation de haute qualité et son interface épurée à deux boutons garantit une répétabilité maximale.

### Simple d'utilisation

Son interface épurée exécute le cycle préprogrammé (10 minutes à 3 400 RPM/1 600 xg) d'une simple pression sur un bouton. La durée de centrifugation peut être réglée sur une valeur comprise entre 1 et 30 minutes.

### Idéale pour centrifuger des échantillons lorsque vous êtes en déplacement

En ayant la possibilité de réaliser des centrifugations dans leur véhicule, les phlébotomistes sont libres de planifier une longue tournée sans avoir à repasser par le laboratoire. Cet appareil abordable peut grandement élargir la gamme de services et la productivité sans sacrifier la qualité des échantillons ou la santé des patients.

### Conçue pour durer

Sans entretien. Son moteur sans balais et son système de refroidissement par convection exclusif garantissent des années de séparations de haute qualité.

### Un concentré de sécurité

Garantit une sécurité maximale grâce au couvercle incassable transparent qui se verrouille jusqu'à l'arrêt complet de la centrifugeuse.

### Une valeur sûre


La centrifugeuse est livrée prête à l'emploi, avec un rotor horizontal, des supports de tubes et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.




### Rotor horizontal à 2 positions

Notre rotor pivotant breveté comporte un support de tubes à essais exclusif qui produit des échantillons séparés horizontalement, idéaux pour le transport.

### Angle de chargement

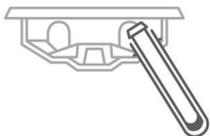

### Angle de rotation

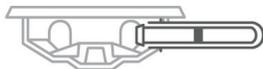


Tubes	Applications	Centrifugation	Inclus	Garantie
6 75-100 mm (3-10 ml)	Biochimie, Coag., PPP	Horizontal FCR max. de 1 600 xg 3 400 RPM max.	Rotor supports de tubes	2 ans Rotor : garanti à vie Extension de garantie disponible

# DRUCKER MODÈLE 642M

642M	Références
Centrifugeuse	00-077-009-000
Support pour tubes de 75-100 ml	7713079 (qté : 1)
Plateforme SmartView	00-079-009-001
Extension de garantie de 1 an	03-0-0007-0001
Extension de garantie de 2 ans	03-0-0007-0002
Extension de garantie de 3 ans	03-0-0007-0006

642M	Spécifications
Niveau sonore	65 dBA
Dimensions	11,75 x 14 x 8,75 po 30 x 35,5 x 22 cm
Poids	12 lb (5,4 kg)
Accélération max.	10 secondes
Décélération max.	20 secondes
Alimentation	12 V

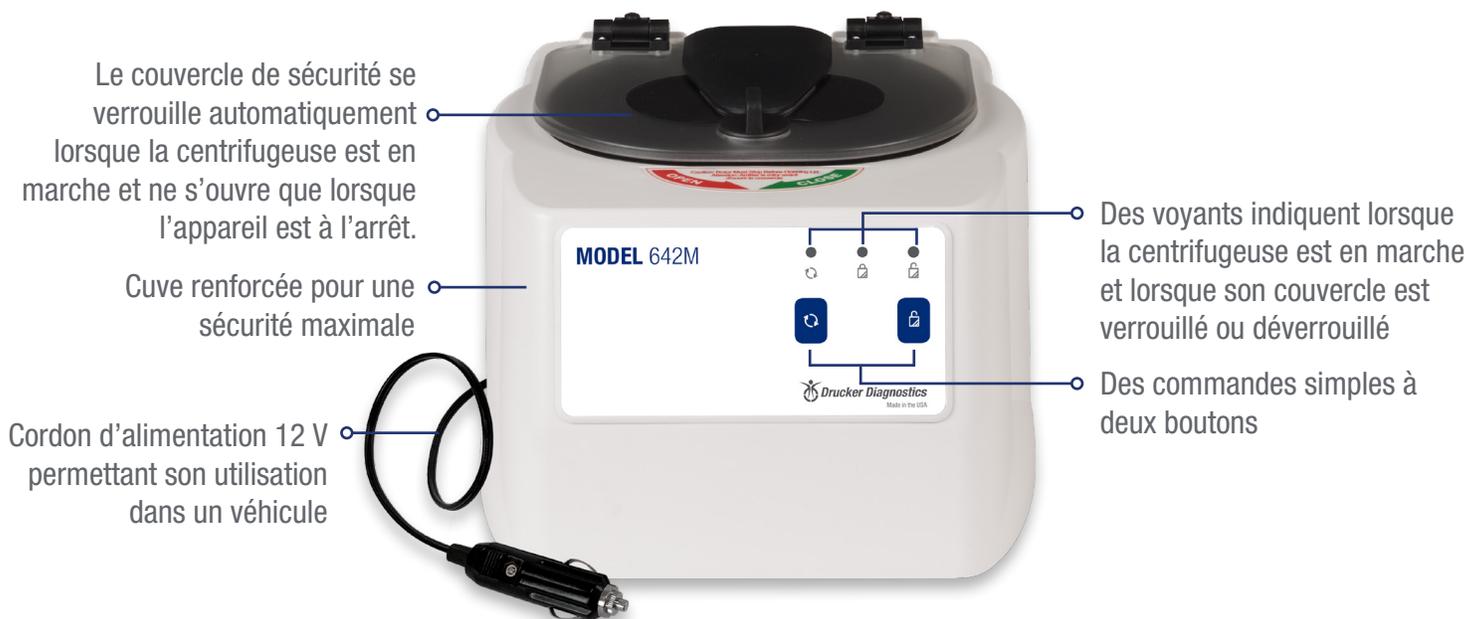

Le couvercle de sécurité se verrouille automatiquement lorsque la centrifugeuse est en marche et ne s'ouvre que lorsque l'appareil est à l'arrêt.

Cuve renforcée pour une sécurité maximale

Cordon d'alimentation 12 V permettant son utilisation dans un véhicule

Des voyants indiquent lorsque la centrifugeuse est en marche et lorsque son couvercle est verrouillé ou déverrouillé

Des commandes simples à deux boutons

## Renforcez la protection de vos échantillons lorsque vous êtes sur la route grâce aux coffres de transport verrouillables SampleSafe™ de Drucker



Coffre de transport verrouillable à ouverture par le haut

Coffre de transport verrouillable à ouverture frontale

Les températures extrêmes peuvent rendre un échantillon inutilisable en seulement 15 minutes, ce qui pose un problème de taille aux phlébotomistes itinérants. La solution : le SampleSafe™ de Drucker. Que les échantillons soient stockés dans un véhicule froid ou surchauffé, le SampleSafe préserve l'intégrité des échantillons pendant 24 heures maximum et vous permet d'atteindre encore plus de patients.

**Coffre de transport verrouillable SampleSafe™ à ouverture par le haut :**

Réf. 00-071-009-000

**Coffre de transport verrouillable SampleSafe™ à ouverture frontale :**

Réf. 00-078-009-000

**HOMOLOGUÉ  
PAR LA FDA**

**RoHS  
Compliant**



**ISO13485  
certified**



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

