

MODELO DRUCKER 614B

CENTRÍFUGA DE UNA VELOCIDAD CON ROTOR DE ÁNGULO FIJO

Con una sola configuración de fuerza g y un temporizador mecánico ajustable, la centrífuga 614B proporciona flexibilidad de tiempo de funcionamiento y procesamiento en ángulo fijo a un precio económico. Utilícela donde sea que se analicen especímenes in situ.

Un Excelente Precio

Cada centrífuga viene lista para funcionar con un rotor de ángulo fijo, soportes para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

Fácil de Usar

Configurada correctamente cada vez sin necesidad de seleccionar a partir de una variedad de opciones complicadas. La centrífuga 614B ofrece una única configuración de velocidad de 1.100 xg de fuerza g y un dial mecánico fácilmente ajustable con tiempos de 1 a 30 minutos.

Operación con Sistema del Aire

El diseño único de la carcasa del motor y de la cámara de rotación mantiene los especímenes frescos durante su procesamiento.

Construida para Durar


Disfrute años de operación sin mantenimiento con los componentes reforzados y el motor sin escobillas de la centrífuga 614B.




Rotor de Ángulo Fijo Incluido

Utilizada para centrifugar tubos de 75, 100 y 125 mm en soportes para tubos especialmente diseñados.

Ángulo de carga

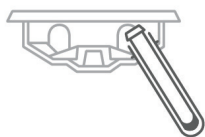

Ángulo de rotación

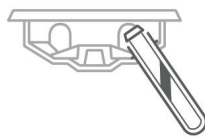

Centrifugado en Rotor de Ángulo Fijo vs. Centrifugado en Rotor Horizontal


Las centrífugas de ángulo fijo producen capas de gel que pueden ser susceptibles a rupturas durante el transporte. Estas muestras dañadas deben ser centrifugadas nuevamente. Dicho proceso no es recomendado por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés) debido a sus conocidos efectos negativos en los resultados analíticos. Para una mejor formación de capas de gel, especialmente si se trata de tubos que van a ser transportados, por favor considere el centrifugado horizontal con el **Modelo 642E** o la serie **HORIZON**.

Tubos	Aplicaciones	Centrifugado	Incluye	Garantía
6 75-100, 125 mm 0,5-15 mL	Bioquímica, Coagulación	Ángulo Fijo 1.100 xg RCF máx. 3.250 RPM máx.	Rotor, Vasos, Soportes para tubos	2 años Rotor: garantía de por vida Garantía ampliada disponible

MODELO DRUCKER 614B

614B	Números de las partes
Centrífuga	00-004-009-001
Soporte para tubos de 75-100 mm	7713079 (1 cantidad)
Soporte para tubos de 125 mm	7713032 (1 cantidad)
Plataforma SmartView	00-079-009-001
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0001
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0002
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0006

614B	Especificaciones
Nivel de Sonido	55 dBA
Dimensiones	11,75 x 14 x 8,75 pulg. 30 x 35.5 x 22 cm
Peso	11 lbs (5 kg)
Aceleración máx.	30 segundos
Desaceleración máx.	40 segundos
Potencia	115 V – 50/60 Hz

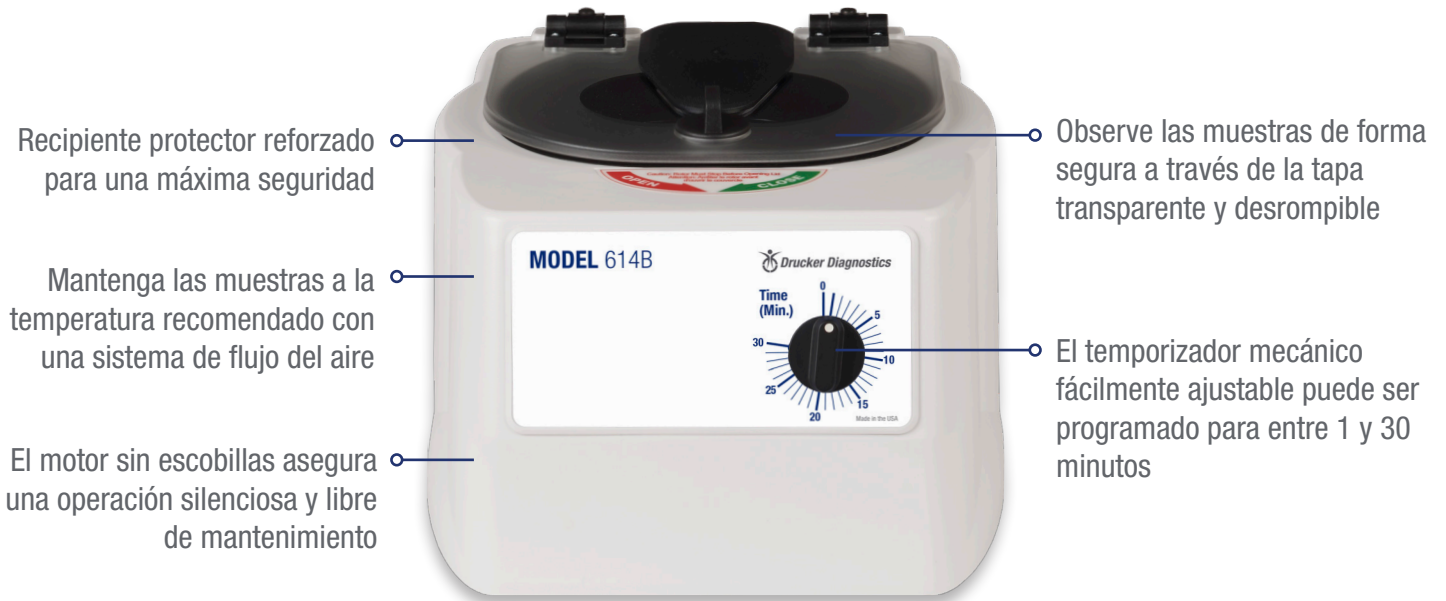

Recipiente protector reforzado para una máxima seguridad

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire

El motor sin escobillas asegura una operación silenciosa y libre de mantenimiento

Observe las muestras de forma segura a través de la tapa transparente y desrompible

El temporizador mecánico fácilmente ajustable puede ser programado para entre 1 y 30 minutos

OTROS MODELOS DE DRUCKER



642E

La centrífuga de laboratorio número 1 en el mundo
Para sangre



HORIZON 6 FA

3 ciclos, 6 tubos
Para sangre y orina



HORIZON 6 Flex FA

Pantalla digital, 10 ciclos, 6 tubos
Para sangre y orina

LISTADO EN LA
FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

