

MODELO DRUCKER 642E

CENTRIFUGA DE UNA VELOCIDAD **CON SET & LOCK**

La centrifuga 642E es la **centrífuga de laboratorio clínico más vendida del mundo**. La fácil operación con dos botones garantiza la repetibilidad y estandarización, mientras que su diseño avanzado brinda siempre una alta calidad de separación de sangre. Su velocidad y su tiempo de procesamiento preestablecidos hacen que la 642E la centrifuga ideal para la obtención de resultados uniformes en consultorios médicos, centros de servicio al paciente y lugares de alcance comunitario.

Fácil de Usar

Centrifugue muestras presionando un solo botón. La centrifuga 642E procesa tubos de 75-100 mm (3-10 mL) para bioquímica, coagulación y plasma bajo en plaquetas (PPP).

Configuraciones Simples

La centrifuga 642E cuenta con un tiempo de funcionamiento preestablecido de 10 minutos a 1.600 xg para todas las necesidades bioquímicas comunes.

Construida para Durar

No necesita mantenimiento de rutina. El motor sin escobillas y el exclusivo sistema de enfriamiento por convección garantizan años de separaciones de alta calidad.

Diseñada para la Seguridad

Proteja su laboratorio con la tapa transparente y desrompible que se bloquea hasta que la centrifuga se haya detenido por completo.

Un Excelente Precio


Obtenga la centrifuga de laboratorio clínico número 1 del mundo a un precio que se ajusta a cualquier presupuesto. La unidad viene lista para usar con el rotor horizontal, soportes para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.




Rotor Horizontal de 2 Etapas

Nuestro diseño patentado de rotor horizontal oscilante incorpora un exclusivo soporte para tubos de análisis que produce las muestras ideales horizontalmente separadas.

Ángulo de carga

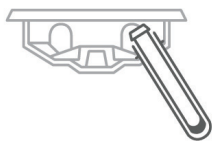

Ángulo de rotación

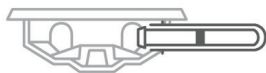


| Tubos | Aplicaciones | Centrifugado | Incluye | Garantía |
|-----------------------------|---|---|------------------------------|---|
| 6 75 y 100 mm 3-10 mL | Bioquímica, Coagulación, Plasma Bajo en Plaquetas (PPP) | Horizontal 1.600 xg RCF máx. 3.400 RPM máx. | Rotor Soportes para tubos | 2 años Rotor: garantía de por vida Garantía ampliada disponible |

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

MODELO DRUCKER 642E

| 642E | Números de las partes |
|---------------------------------|-----------------------|
| Centrífuga | 00-018-009-001 |
| Soporte para tubos de 75-100 mm | 7713079 (1 cantidad) |
| Plataforma SmartView | 00-079-009-001 |
| Extensión de garantía de 1 año | 03-0-0007-0001 |
| Extensión de garantía de 2 años | 03-0-0007-0002 |
| Extensión de garantía de 3 años | 03-0-0007-0006 |

| 642E | Especificaciones |
|---------------------|--|
| Nivel de Sonido | 64 dBA |
| Dimensiones | 11,75 x 14 x 8,75 pulg. 30 x 35.5 x 22 cm |
| Peso | 11 lbs (5 kg) |
| Aceleración máx. | 10 segundos |
| Desaceleración máx. | 20 segundos |
| Potencia | 115 V – 50/60 Hz |

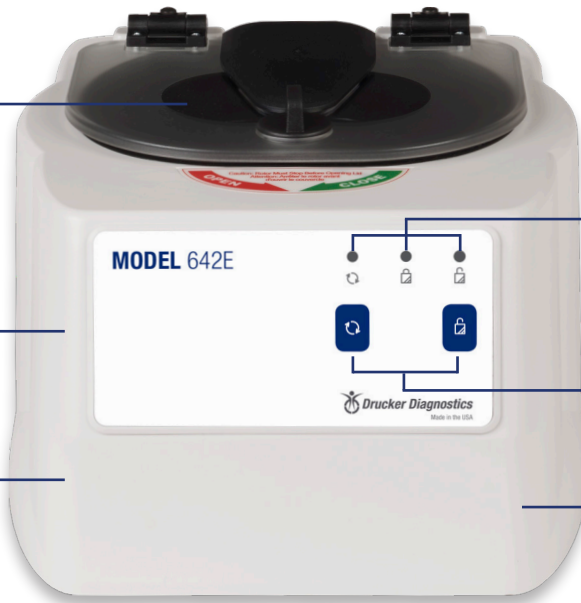

La tapa de seguridad se bloquea automáticamente durante la operación y no podrá ser abierta hasta que la centrífuga se haya detenido

Recipiente protector reforzado para una máxima seguridad

El motor sin escobillas asegura una operación silenciosa y libre de mantenimiento

La luz indica que la centrífuga está en funcionamiento, bloqueada o desbloqueada

Controles simples de dos botones

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire

OTROS MODELOS DE DRUCKER



642M
Para centrifugado móvil
Para uso con un enchufe de 12V



HORIZON 6
3 ciclos preestablecidos, disponible para
6, 12, 24 tubos
Para sangre y orina



Caja de seguridad SampleSafe™
Protección de muestras por 24 horas
Modelos de carga superior y frontal

LISTADO EN LA
FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

