

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12 Y 24 CENTRÍFUGAS DE RUTINA **CON SET & LOCK**



Minimice errores, reduzca el tiempo de capacitación y obtenga los mejores resultados para el paciente con HORIZON. Configure y bloquee sus ciclos validados para evitar cambios accidentales. Reduzca aún más los errores potenciales con la opción de bloquear en un solo ciclo.

Fácil de Usar

Use la interfaz simple de dos botones para seleccionar una configuración preestablecida o programe y registre sus configuraciones validadas en la etiqueta incluida. Procese tubos de 75-125 mm (0,5-50 mL) en el mismo soporte sin almohadillas.

Fácil de Monitorizar

Procese muestras de manera más eficiente con la tapa con iluminación LED del HORIZON: se apaga cuando la centrifuga está lista para ser cargada, se enciende cuando está funcionando y emite destellos intermitentes al final del ciclo.

Construida para Durar

No necesita de mantenimiento de rutina con nuestro motor sin escobillas, componentes de compuestos diseñados.

Diseñada para la Seguridad

Proteja su laboratorio con la detección de desequilibrios y una tapa irrompible que solo puede ser abierta cuando el rotor se ha detenido por completo, incluso cuando la unidad pierde el abastecimiento de energía.

Un Excelente Precio

Calidad insuperable para cualquier presupuesto. Cada centrifuga HORIZON viene lista para funcionar con un rotor horizontal, soportes universales para tubos y una garantía de 2 años incluida en el precio económico.

Capacidad de los tubos	6, 12 o 24 (75-125 mm/0,5-50 mL)
Aplicaciones	Bioquímica, Coagulación, Plasma Bajo en Plaquetas (PPP), Plasma rico en Plaquetas (PRP), Orina
Centrifugado	Horizontal (máx. 2.000 xg/3.800 RPM)
Incluye	Rotor, Vasos y Soportes para Tubos, Etiqueta de Ciclos
Garantía *	2 años (rotor: garantía de por vida)

* *Garantía ampliada disponible*



HORIZON 6



HORIZON 12



HORIZON 24

Diseñada, construida y con servicio al cliente situado en los EE. UU.

HORIZON 6, 12 Y 24


1. Chem 2. Coag 3. Urine

La luz de la tapa indica el estado del ciclo: listo, en funcionamiento, finalizado

3 ciclos preestablecidos por defecto* para bioquímica, coagulación y orina

* configuraciones preestablecidas basadas en las directrices del Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI, por sus siglas en inglés) y las instrucciones de uso del fabricante de tubos

Utilice las configuraciones preestablecidas o programe sus ciclos validados utilizando los dos botones

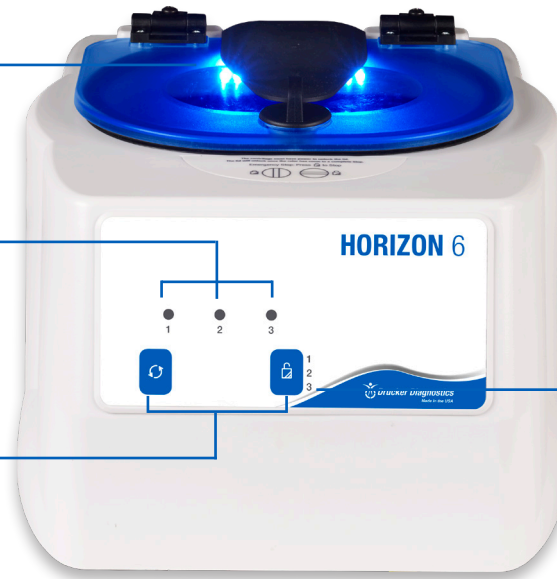

Nombre sus ciclos como prefiera con la etiqueta borrable incluida

Mantenga las muestras a la temperatura recomendado con una sistema de flujo del aire

Presione para seleccionar un ciclo

Puede ser bloqueada en un solo ciclo o personalizada en el laboratorio

Números de las partes	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Centrífuga	00-276-009-000	00-283-009-000	00-284-009-000
Soporte/vaso de reemplazo para tubos de 75-100 mm	7713079 (1 cantidad)	7713079 (1 cantidad)	7713023 (1 cantidad)
Soporte para tubos de 50 mL			7713037
Tapa			7713035
Plataforma SmartView	00-079-009-001		
Extensión de garantía de 1 año	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extensión de garantía de 2 años	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extensión de garantía de 3 años	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
* Configuraciones personalizadas	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Agregue este número de parte a su orden de compra para que sus ciclos personalizados validados sean preestablecidos en la fábrica

Ciclos preestablecidos estándar		HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
1 (Bioquímica)	10 min a 1.800 xg	3.600 RPM	3.500 RPM	3.300 RPM
2 (Coagulación, PPP)	15 min a 1.500 xg	3.300 RPM	3.200 RPM	3.000 RPM
3 (PRP, Orina)	5 min a 500 xg	1.900 RPM	1.800 RPM	1.700 RPM

Especificaciones	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Nivel de Sonido	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Dimensiones (An. x Prof. x Alt.)	12 x 14 x 9 pulg. 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 pulg. 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 pulg. 38 x 43 x 23 cm
Peso	12 lbs (5,4 kg)	30 lbs (13,7 kg)	39 lbs (17 kg)
Potencia	95 a 253 V – 50/60 Hz		

LISTADO EN LA FDA



RoHS Compliant



ISO13485 certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

