



## DRUCKER MODÈLE 614B

### CENTRIFUGEUSE À **ANGLE FIXE MONOVITESSE**

Grâce à un réglage de force g unique et à une minuterie mécanique réglable, la 614B garantit une excellente flexibilité et une centrifugation à angle fixe à un prix abordable. S'utilise partout où vous devez analyser des échantillons.

#### Une valeur sûre

La centrifugeuse est livrée prête à l'emploi, avec un rotor à angle fixe, des supports de tubes et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.

#### Simple d'utilisation

Obtenez les bons réglages à chaque fois sans avoir à sélectionner une multitude d'options compliquées. La 614B comporte un réglage de force g paramétré sur 1 100 xg et une minuterie mécanique facilement réglable qui permet de définir un temps de centrifugation compris entre 1 et 30 minutes.

#### Un fonctionnement sans dégagement de chaleur

La conception exclusive du compartiment moteur et de la chambre de rotation maintient les échantillons au frais pendant le traitement.


#### Conçue pour durer

Profitez de plusieurs années de fonctionnement sans entretien grâce aux composants renforcés et au moteur sans balai de la 614B.


#### Rotor à angle fixe inclus

Utilisé pour centrifuger des tubes de 75, 100 et 125 mm dans des supports spécialement conçus.

#### Angle de chargement

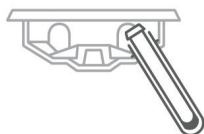

#### Angle de rotation

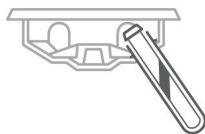

#### Centrifugation à angle fixe vs centrifugation horizontale


Les centrifugeuses à angle fixe produisent des couches de gel susceptibles de se rompre pendant le transport. Ces échantillons abîmés doivent être recentrifugés – un procédé que le CLSI déconseille à cause de ses effets négatifs connus sur les résultats d'analyse. Pour une meilleure formation de la couche de gel, notamment lorsque les tubes sont destinés à être transportés, réalisez une centrifugation horizontale au moyen du **Modèle 642E** ou d'un appareil de la gamme **HORIZON**.

Tubes	Applications	Centrifugation	Inclus	Garantie
6 75-100, 125 mm 0,5-15 ml	Biochimie Coag.	Angle fixe FCR max. de 1 100 xg 3 250 RPM max.	Rotor, godets, supports de tubes	2 ans Rotor : garanti à vie Extension de garantie disponible

# DRUCKER MODÈLE 614B

614B	Références
Centrifugeuse	00-004-009-001
Support pour tubes de 75-100 ml	7713079 (qté : 1)
Support pour tubes de à 125 ml	7713032 (qté : 1)
Plateforme SmartView	00-079-009-001
Extension de garantie de 1 an	03-0-0007-0001
Extension de garantie de 2 ans	03-0-0007-0002
Extension de garantie de 3 ans	03-0-0007-0006

614B	Spécifications
Niveau sonore	55 dBA
Dimensions	11,75 x 14 x 8,75 po 30 x 35,5 x 22 cm
Poids	11 lb (5 kg)
Accélération max.	30 secondes
Décélération max.	40 secondes
Alimentation	115 V – 50/60 Hz

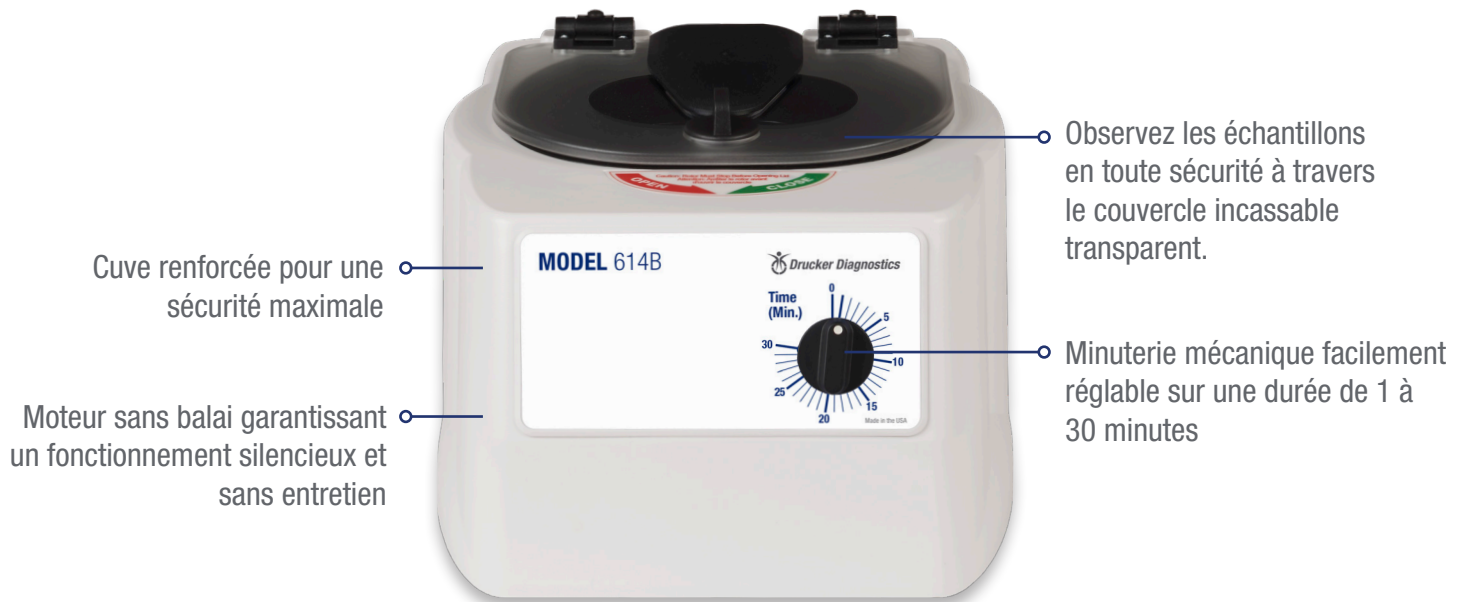

Cuve renforcée pour une sécurité maximale

Moteur sans balai garantissant un fonctionnement silencieux et sans entretien

Observez les échantillons en toute sécurité à travers le couvercle incassable transparent.

Minuterie mécanique facilement réglable sur une durée de 1 à 30 minutes

## AUTRES MODÈLES DRUCKER



### 642E

La centrifugeuse de laboratoire la plus vendue dans le monde  
Pour le sang



### HORIZON 6 FA

3 cycles, 6 tubes  
Pour le sang et l'urine



### HORIZON 6 Flex FA

Écran numérique, 10 cycles, 6 tubes  
Pour le sang et l'urine

**ENREGISTRÉE  
AVEC LA FDA**



**RoHS  
Compliant**



**ISO13485  
certified**



[druckerdiagnostics.com](http://druckerdiagnostics.com)  
[sales@druckerdiagnostics.com](mailto:sales@druckerdiagnostics.com)

+1-814-692-7661

