

## DRUCKER MODÈLE 642B

### CENTRIFUGEUSE **HORIZONTALE MONOVITESSE**

Garantit des séparations d'échantillons de haute qualité à notre prix le plus abordable. Le réglage de vitesse unique et la minuterie réglable de la 642B conviennent pour un large éventail de besoins en préparation d'échantillons sanguins. Grâce à sa conception exclusive, le rotor permet un traitement horizontal et ne nécessite que peu d'entretien.

#### Une valeur sûre

Un rapport qualité/prix imbattable. La centrifugeuse est livrée prête à l'emploi, avec un rotor, des supports de tubes et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.

#### Simple d'utilisation

La 642B permet une centrifugation à vitesse unique fiable grâce à une minuterie mécanique facilement réglable. Réglée pour fonctionner à une vitesse constante de 1 600 xg, la 642B permet de réaliser des cycles de 1 à 30 minutes.

#### Un fonctionnement sans dégagement de chaleur

La conception exclusive du compartiment moteur et de la chambre de rotation maintient les échantillons au frais pendant le traitement.

#### Conçue pour durer

Les composants renforcés et le moteur sans balais de cette centrifugeuse garantissent des années de fonctionnement sans entretien. Le couvercle incassable

#### Permet une meilleure répétabilité

Lorsque la régularité des résultats est essentielle, rien ne vaut la centrifugeuse électronique monovitesse **642E**. La 642E est la centrifugeuse de laboratoire la plus vendue dans le monde et comporte une interface simple à deux boutons et une durée de centrifugation prédéfinie qui convient pour les applications les plus courantes.




**Modèle  
642E**




#### Rotor horizontal à 2 positions

Notre rotor horizontal pivotant breveté comporte un support de tube à essai exclusif idéal pour la séparation horizontale des échantillons.

#### Angle de chargement

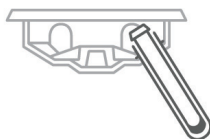

#### Angle de rotation

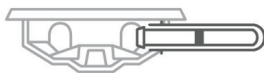


Tubes	Applications	Centrifugation	Inclus	Garantie
<b>6</b> 75-100 mm 0,5-10 ml	Biochimie, Coag., PPP	Horizontal FCR max. de 1 600 xg 3 400 RPM max.	Rotor, godets, supports de tubes	2 ans Rotor : garanti à vie Extension de garantie disponible

**Conçue et fabriquée aux États-Unis. SAV également basé aux États-Unis.**

# DRUCKER MODÈLE 642B

642B	Références
Centrifugeuse	00-016-009-001
Support pour tubes de 75-100 ml	7713079 (qté : 1)
Plateforme SmartView	00-079-009-001
Extension de garantie de 1 an	03-0-0007-0001
Extension de garantie de 2 ans	03-0-0007-0002
Extension de garantie de 3 ans	03-0-0007-0006

642B	Spécifications
Niveau sonore	65 dBA
Dimensions	11,75 x 14 x 8,75 po 30 x 35,5 x 22 cm
Poids	11 lb (5 kg)
Accélération max.	10 secondes
Décélération max.	80 seconds
Alimentation	115 V – 50/60 Hz

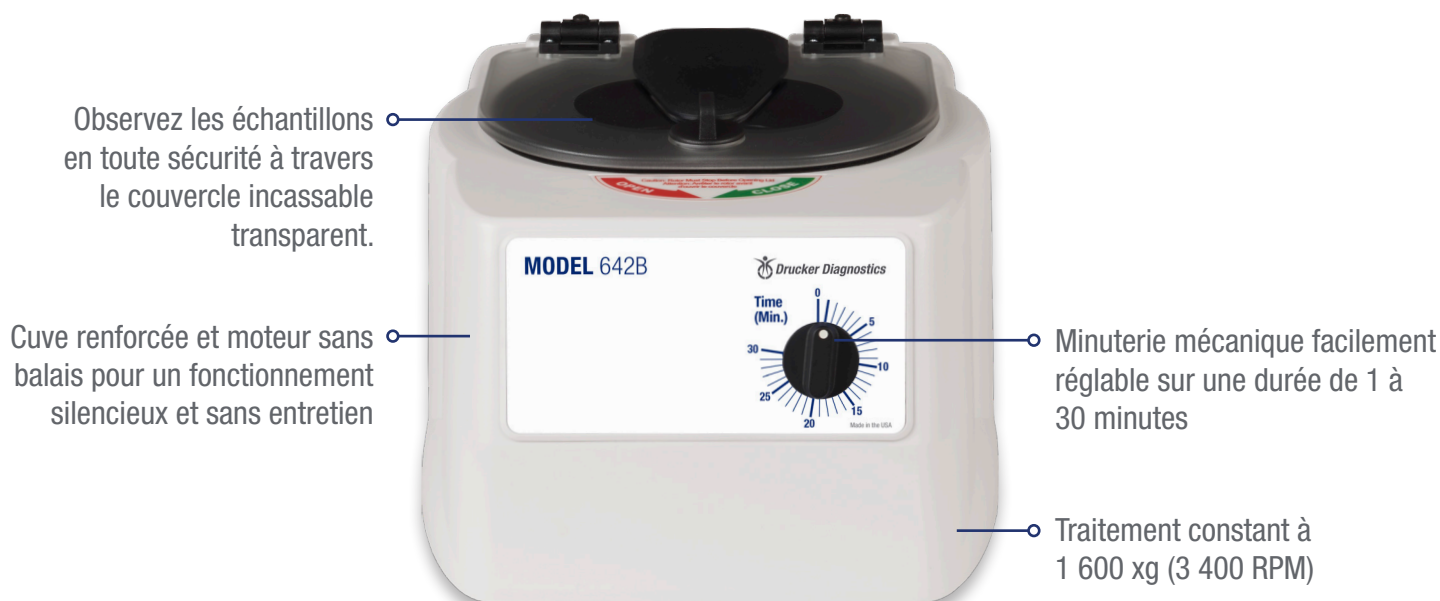

## AUTRES MODÈLES DRUCKER



### 642E

La centrifugeuse de laboratoire la plus vendue dans le monde  
Pour le sang



### HORIZON

3 cycles, disponible pour 6, 12, 24 tubes  
Pour le sang et l'urine



### HORIZON Flex

Écran numérique, disponible pour 6, 12, 24 tubes  
10 cycles, pour le sang et l'urine

**ENREGISTRÉE  
AVEC LA FDA**



**RoHS  
Compliant**



**ISO13485  
certified**



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

