

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12 et 24

CENTRIFUGEUSES **STANDARDS** « **SET & LOCK** »

Limitez le risque d'erreur, réduisez le temps de formation et servez au mieux les intérêts des patients grâce aux centrifugeuses HORIZON. Paramétrez et verrouillez vos cycles validés afin de prévenir toute modification accidentelle. Réduisez encore les risques d'erreurs grâce à l'option permettant de définir un cycle unique et non modifiable dans la centrifugeuse.

Simple d'utilisation

Utilisez l'interface simplifiée à deux boutons de l'appareil pour sélectionner un cycle prédéfini ou pour programmer et enregistrer vos paramètres validés. Traitez des tubes de 75-125 mm (0,5-50 ml) dans le même support, sans avoir à insérer de cales.

Facile à surveiller

Traitez vos échantillons plus efficacement grâce aux voyants de la centrifugeuse HORIZON : ils sont éteints lorsque la centrifugeuse est prête à être chargée, allumés lorsqu'elle est en marche et clignotants lorsque le cycle est terminé.

Conçue pour durer

Sans entretien. Moteur sans balais, composants en matériaux composites de haute technologie.

Une concentration sur la sécurité

Protégez votre laboratoire avec la fonction de détection de déséquilibre et un couvercle incassable qui ne peut être ouvert que lorsque le rotor est à l'arrêt, et ce, même en cas de coupure de courant.

Une valeur sûre

Un rapport qualité/prix imbattable. La centrifugeuse HORIZON est livrée prête à l'emploi, avec un rotor horizontal, des supports de tubes universels et une garantie de 2 ans, le tout, pour un prix abordable.



Capacité des tubes	6, 12 ou 24 (75-125 mm/0,5-50 ml)
Applications	Biochimie, coag., PPP, PRP, urine
Centrifugation	Horizontale (max. de 2 000 xg/3 800 RPM)
Inclus	Rotor, godets et supports de tubes, étiquette de cycle
Garantie *	2 ans (rotor : garanti à vie)

* Extension de garantie disponible



HORIZON 6



HORIZON 12



HORIZON 24

Conçue et fabriquée aux États-Unis. SAV également basé aux États-Unis.


HORIZON 6, 12 et 24

Les voyants indiquent l'étape du cycle : prêt, en marche, terminé.

3 cycles prédéfinis par défaut* pour la biochimie, la coag. et l'urine

* cycles prédéfinis basés sur les recommandations de la CLSI et la notice fournie par le fabricant des tubes

Utilisez les cycles prédéfinis ou programmez vos cycles validés à l'aide des deux boutons

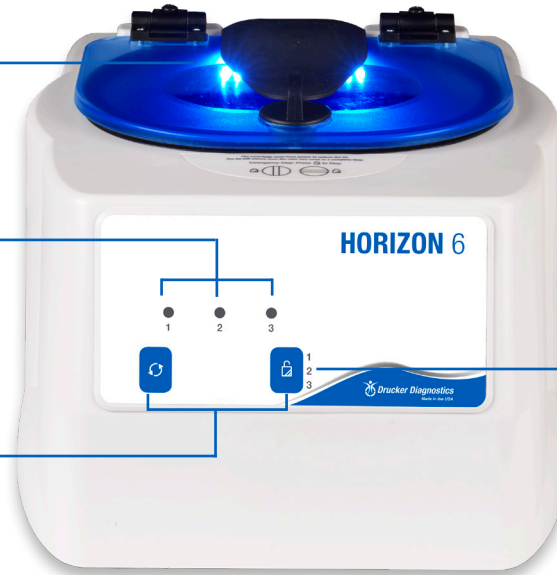

1. Chem 2. Coag 3. Urine

Nommez vos cycles à votre façon grâce à l'étiquette effaçable fournie.

Appuyez sur le bouton pour sélectionner un cycle.

Peut être verrouillée sur un cycle unique ou personnalisée au laboratoire

Références	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Centrifugeuse	00-276-009-000	00-283-009-000	00-284-009-000
Support/godet de rechange pour tubes de 75-100 mm	7713079 (qté : 1)	7713079 (qté : 1)	7713023 (qté : 1)
Support pour tube de 50 ml			7713037
Bouchon			7713035
Plateforme SmartView	00-079-009-001		
Extension de garantie de 1 an	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extension de garantie de 2 ans	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extension de garantie de 3 ans	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
* Paramètres personnalisés	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Ajoutez cette référence à votre commande pour que vos cycles personnalisés soient préprogrammés à l'usine

Cycles préprogrammés standards		HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
1 (Biochimie)	10 min à 1 800 xg	3 600 RPM	3 500 RPM	3 300 RPM
2 (Coag., PPP)	15 min à 1 500 xg	3 300 RPM	3 200 RPM	3 000 RPM
3 (PRP, Urine)	5 min à 500 xg	1 900 RPM	1 800 RPM	1 700 RPM

Spécifications	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Niveau sonore	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Dimensions (l x p x h)	12 x 14 x 9 po 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 po 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 po 38 x 43 x 23 cm
Poids	12 lb (5,4 kg)	30 lb (13,7 kg)	39 lb (17 kg)
Alimentation	95 à 253 V – 50/60 Hz		

ENREGISTRÉE
AVEC LA FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

