

DRUCKER MODELL 642B

HORIZONTALE EINSTUFIGE ZENTRIFUGE

Erstellen Sie hochwertige Probentrennungen zum günstigsten Preis. Die einfachen Ein-Stufen-Einstellungen des 642B und der einstellbare mechanische Timer erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen an die Blutprobenvorbereitung. Das einzigartige Rotordesign ermöglicht eine horizontale Bearbeitung mit minimalem Wartungsaufwand und ohne Ärger.

Hoher Mehrwert

Unschlagbare Qualität für jedes Budget. Jedes Gerät kommt einsatzbereit mit einem Rotor, den Röhrchenhaltern und einer 2-Jahres-Gewährleistung zum günstigen Preis.

Einfach zu verwenden

Der 642B bietet leistungsstarke einstufige Verarbeitung mit einem leicht einstellbaren mechanischen Timer. Der 642B ist so eingestellt, dass er mit konstanter Geschwindigkeit bei 1.600 xg läuft. Die Zykluszeit kann zwischen 1 und 30 Minuten gewählt werden.

Kühlbetrieb

Das einzigartige Design des Motorgehäuses und der Rotationskammer hält die Proben während der Bearbeitung kühl.

Zuverlässig gebaut


Verstärkte Komponenten und der Brushless-Motor ermöglichen im Jahr den reibungslosen Betrieb ohne Wartung. Der durchsichtige, bruchsichere Deckel erhöht die Sicherheit im Labor.

Für bessere Wiederholbarkeit

Wenn Konsistenz Ihnen wichtig ist, sollten Sie den einstufigen, elektronische **642E** in Betracht ziehen. Der 642E ist die weltweit meistverkaufte klinische Laborzentrifuge und bietet eine einfache Zwei-Tasten-Schnittstelle und eine voreingestellte Laufzeit für alle gängigen Biochemieanforderungen.




**Modell
642E**

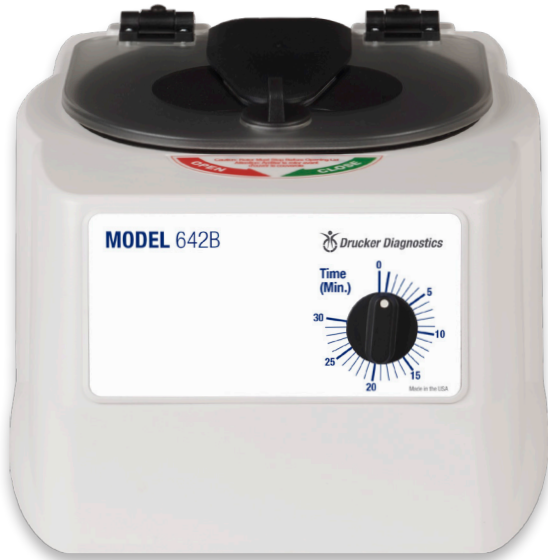


2-stufiger horizontaler Rotor

Unser patentierter horizontaler ausschwenkbarer Rotor beinhaltet einen einzigartigen Reagenzglashalter, der ideale horizontal getrennte Proben herstellt.

Ladewinkel

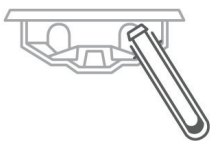

Drehwinkel

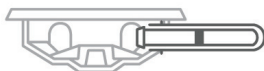

Röhrchen

6
75-100 mm
0,5-10 ml

Anwendungen

Biochemie,
Koagulation, PPP

Zentrifugation

Horizontal
1.600 xg Max. Relatives
Fliehkraftfeld
3.400 Max.U/min

Enthalten

Rotor, Eimerchen,
Röhrchenhalter


Gewährleistung

2 Jahre
Rotor: lebenslange
Gewährleistung
Erweiterte Gewährleistung
verfügbar

DRUCKER MODELL 642B

642B	Teilenummern
Zentrifuge	00-016-009-001
75-100 mm Röhrchenhalter	7713079 (1 St.)
SmartView-Plattform	00-079-009-001
1 Jahr Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0001
2 Jahre Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0002
3 Jahre Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0006

642B	Spezifikationen
Schallpegel	65 dBA
Abmessungen	11,75 x 14 x 8,75 Zoll 30 x 35,5 x 22 cm
Gewicht	11 Pfund (5 kg)
Maximale Beschleunigung	10 Sekunden
Maximale Verzögerung	80 Sekunden
Leistung	115 V – 50/60 Hz

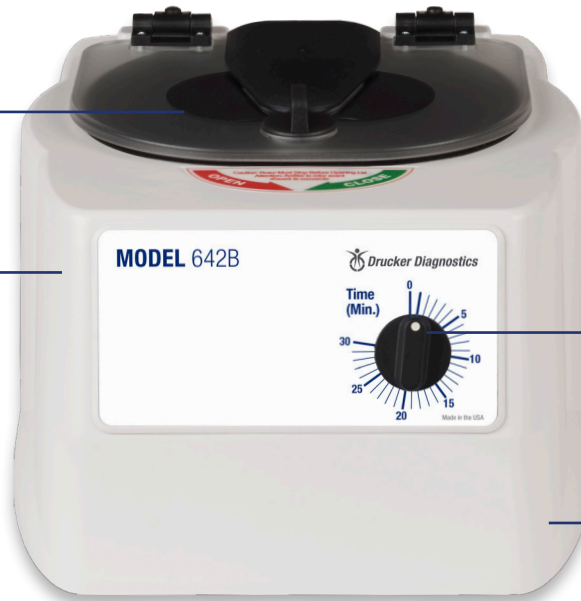

Beobachten Sie die Proben sicher durch den durchsichtigen, bruchsicheren Deckel

Verstärkte Schutzschale und Brushless-Motor für einen ruhigen, wartungsfreien Betrieb

Der leicht einstellbare mechanische Timer kann in einer Zeit zwischen 1 und 30 Minuten eingestellt werden

Konsistente Bearbeitung bei 1.600 xg (3.400 U/min)

ANDERE DRUCKER-MODELLE



642E

Weltweit führende klinische Labor-Zentrifuge Für Blut



HORIZON

3 Zyklen, Verfügbar für 6, 12, 24 Röhren Für Blut und Urin



HORIZON Flex

Digitalanzeige, Verfügbar für 6, 12, 24 Röhren 10 Zyklen, Für Blut und Urin

FDA GELISTET



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

