

DRUCKER MODELL 642M 12V DC MOBILE ZENTRIFUGE

Der 642M ermöglicht effiziente Wege und eine längere Reichweite für mobile Phlebotomiker durch Zentrifugation im Fahrzeug. Drehen Sie die Proben spätestens nach zwei Stunden nach der Entnahme und fahren Sie auf direktem Wege weiter, ohne dass Sie zum Zentrallabor zurückkehren müssen. Der 642M wird direkt von der 12-V-Stromversorgung Ihres Fahrzeugs betrieben und bietet horizontale Zentrifugation für die hochwertige Gel-Tuben-Trennung und Zwei-Knopf-Bedienung für maximale Wiederholbarkeit.

Einfach zu verwenden

Die einfache Schnittstelle führt den voreingestellten Zyklus (10 Minuten bei 3.400 U/min/1.600 xg) auf Knopfdruck aus. Die Laufzeit kann von 1 bis 30 Minuten eingestellt werden.

Entwickelt für die mobile Zentrifugation

Mit der Zentrifugation im Fahrzeug können Phlebotomiker ihre ganztägige Route besser und effizienter einplanen, ohne ins Labor zurückkehren zu müssen. Dieses erschwingliche Gerät kann den Service und die Produktivität erheblich steigern, ohne die Probenqualität oder das Patientenergebnis zu beeinträchtigen.

Zuverlässig gebaut

Keine Routinewartung. Der Brushless-Motor und das einzigartige konvektionsbasierte Kühlsystem gewährleisten jahrelang hochwertige Trennungen.

Sicherheit steht an erster Stelle

Sorgen Sie für maximale Sicherheit durch den durchsichtigen, bruchsicheren Deckel, der gesperrt ist, bis die Zentrifuge vollständig gestoppt ist.

Hoher Mehrwert


Jedes Gerät kommt einsatzbereit mit einem horizontalen Rotor, Universal-Röhrchenhaltern und einer 2-Jahres-Gewährleistung zum günstigen Preis an.




2-stufiger horizontaler Rotor

Unser patentierter horizontaler ausschwenkbarer Rotor beinhaltet einen einzigartigen Reagenzglashalter, der ideale horizontal getrennte Proben herstellt.

Ladewinkel

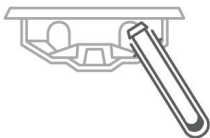

Drehwinkel

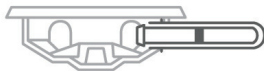


Röhrchen	Anwendungen	Zentrifugation	Enthalten	Gewährleistung
6 75-100 mm (3-10 ml)	Biochemie, Koagulation, PPP	Horizontal 1.600 xg Max. Relatives Fliehkraftfeld 3.400 Max.U/min	Rotor Röhrchenhalter	2 Jahre Rotor: lebenslange Gewährleistung Erweiterte Gewährleistung verfügbar

In den USA entwickelt und hergestellt. US-Support.

DRUCKER MODELL 642M

642M	Teilenummern
Zentrifuge	00-077-009-000
75-100 mm Röhrchenhalter	7713079 (1 St.)
SmartView-Plattform	00-079-009-001
1 Jahr Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0001
2 Jahre Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0002
3 Jahre Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0006

642M	Spezifikationen
Schallpegel	65 dBA
Abmessungen	11,75 x 14 x 8,75 Zoll 30 x 35,5 x 22 cm
Gewicht	12 Pfund (5,4 kg)
Maximale Beschleunigung	10 Sekunden
Maximale Verzögerung	20 Sekunden
Leistung	12V

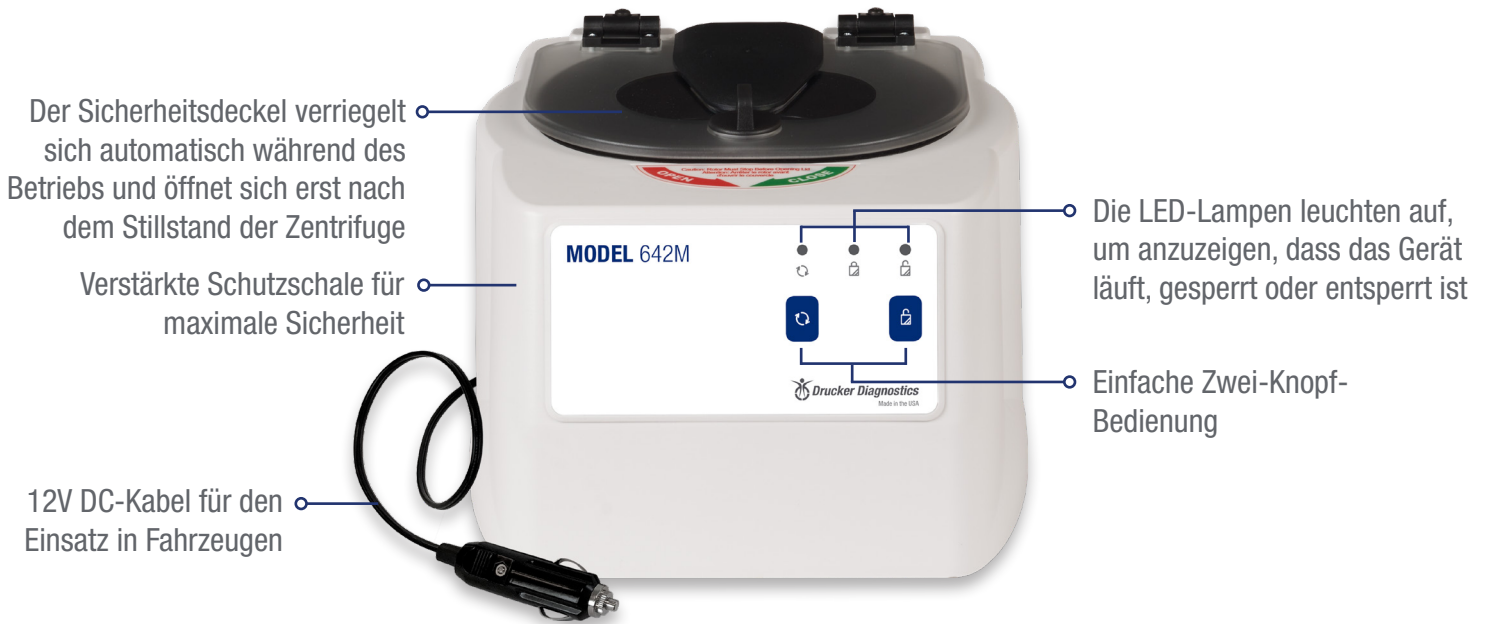

Schützen Sie die Proben unterwegs noch besser, mit den Drucker SampleSafe™ Schließboxes



Extreme Temperaturen können die Proben in nur 15 Minuten unbrauchbar machen, was für mobile Phlebotomiker ein großes Problem darstellt. Der Drucker SampleSafe™ bietet eine Lösung. Selbst bei Lagerung in heißen oder kalten Fahrzeugen bewahrt SampleSafe die Integrität der Probe für bis zu 24 Stunden bei und ermöglicht es Ihnen, noch mehr Patienten zu erreichen.

SampleSafe™ Obere Lade-Schließbox: Teilernr.: 00-071-009-000
SampleSafe™ Frontlade-Schließbox: Teilernr.: 00-078-009-000

FDA GELISTET

RoHS
Compliant



ISO 13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

