

# HORIZON



## DRUCKER HORIZON 6, 12, & 24 SET & LOCK ROUTINE ZENTRIFUGEN

Minimieren Sie Fehler, reduzieren Sie die Schulungszeit und erzielen Sie das beste Ergebnis für Ihre Patienten, mit dem HORIZON. Stellen Sie Ihre validierten Zyklen ein und sperren Sie sie, um versehentliche Änderungen zu verhindern. Reduzieren Sie weitere potenzielle Fehler, dank der Option, einen einzelnen Zyklus zu sperren.

### Einfach zu verwenden

Verwenden Sie die einfache Zwei-Tasten-Schnittstelle, um eine Voreinstellung auszuwählen, oder programmieren und notieren Sie Ihre validierten Einstellungen auf dem mitgelieferten Etikett. Bearbeiten Sie 75-125 mm (0,5-50 ml)-Röhrchen in dem gleichen Halter ohne Polster.

### Einfach zu überwachen

Bearbeiten Sie Proben effizienter mit der LED-Deckelbeleuchtung des HORIZON: aus, wenn die Zentrifuge bereit ist, beladen zu werden, ein, wenn sie läuft und blinkend am Ende jedes Zyklus.

### Zuverlässig gebaut

Keine Routinewartung. Brushless-Motor, konstruierte Verbundkomponenten.

### Sicherheit steht an erster Stelle

Schützen Sie Ihr Labor dank der Unwuchterkennung und einem bruchsicheren Deckel, der nur geöffnet werden kann, wenn der Rotor ruht, auch wenn das Gerät keinen Strom mehr hat.

### Hoher Mehrwert

Unschlagbare Qualität für jedes Budget. Jede HORIZON-Zentrifuge ist einsatzbereit mit einem horizontalen Rotor, Universal-Röhrchenhaltern und einer 2-Jahres-Gewährleistung zum günstigen Preis.

Röhrchenkapazität	6, 12, oder 24 (75-125 mm/0,5-50 ml)
Anwendungen	Biochemie, Koagulation, PPP, PRP, Urin
Zentrifugation	Horizontal (Max. 2.000 xg/3.800 U/min)
Enthalten	Rotor, Eimerchen und Röhrchenhalter, Zyklusetikette
Gewährleistung *	2 Jahre (Rotor: lebenslange Gewährleistung)

\* Erweiterte Gewährleistung verfügbar



**HORIZON 6**



**HORIZON 12**



**HORIZON 24**

**In den USA entwickelt und hergestellt. US-Support.**


# HORIZON 6, 12, & 24

Die Lichter auf dem Deckel zeigen den Status an: bereit, läuft, fertig

3 voreingestellte Zyklen\* für Biochemie, Koagulation und Urin

*\* Voreinstellungen basierend auf den CLSI-Richtlinien und der Gebrauchsanweisung des Röhrenherstellers*

Verwenden Sie die Voreinstellungen oder programmieren Sie Ihre validierten Zyklen mit nur zwei Tasten

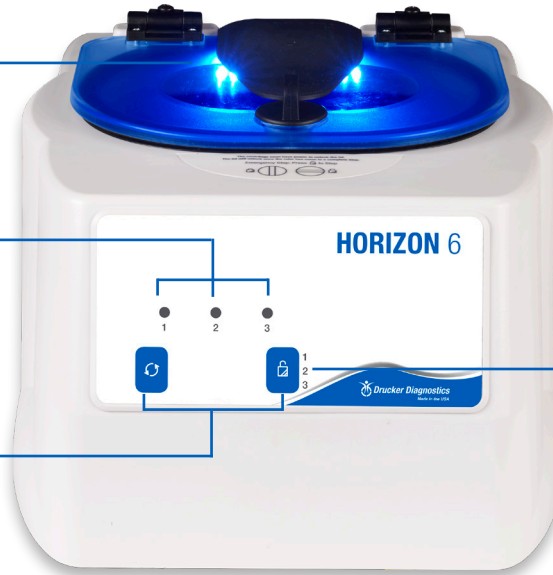

1. Chem 2. Coag 3. Urin

Notieren Sie Ihre Zyklen auf dem mitgelieferten löschbaren Etikett

Drücken Sie, um den Zyklus auszuwählen

Kann auf einen einzigen Zyklus gesperrt oder im Labor angepasst werden

Teilenummern	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Zentrifuge	00-276-009-000	00-283-009-000	00-284-009-000
Ersatz 75-100 mm Röhrenhalter/Eimerchen	7713079 (1 St.)	7713079 (1 St.)	7713023 (1 St.)
50 mm-Röhrenhalter			7713037
Deckel			7713035
SmartView-Plattform	00-079-009-001		
1 Jahr Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
2 Jahre Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
3 Jahre Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
* Benutzerdefinierte Einstellungen	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

\* Fügen Sie diese Teilenummer zu Ihrer Zentrifugenbestellung hinzu, damit Ihre benutzerdefinierten validierten Zyklen im Werk vorprogrammiert werden

Voreingestellte Standardzyklen		HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
1 (Biochemie)	10 min @ 1.800 xg	3.600 U/min	3.500 U/min	3.300 U/min
2 (Koagulation, PPP)	15 min @ 1.500 xg	3.300 U/min	3.200 U/min	3.000 U/min
3 (PRP, Urin)	5 min @ 500 xg	1.900 U/min	1.800 U/min	1.700 U/min

Spezifikationen	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Schallpegel	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 x 14 x 9 Zoll 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 Zoll 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 Zoll 38 x 43 x 23 cm
Gewicht	12 Pfund (5,4 kg)	30 Pfund (13,7 kg)	39 Pfund (17 kg)
Leistung	von 95 bis 253 V – 50/60 Hz		

FDA GELISTET



RoHS  
Compliant



ISO13485  
certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

