

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12, & 24 FLEX PROGRAMMIERBARE ROUTINE ZENTRIFUGEN



Erfüllen Sie mit HORIZON Flex-Routinezentrifugen die unterschiedlichsten Bearbeitungsanforderungen. Passen Sie die Einstellungen an und überprüfen Sie jedes Detail auf der digitalen Anzeige oder programmieren Sie bis zu 10 Zyklen vor.

Einfach zu verwenden

Die voll-digitale Anzeige erleichtert die Anpassung der Zyklusparameter im laufenden Betrieb oder die Einstellung und Auswahl eines der 10 programmierbaren Zyklen. Drehen Sie 75-125 mm (0,5-50 ml) Röhrchen, ohne die Röhrchenhalter zu wechseln oder Polster hinzuzufügen.

Einfach zu überwachen

Bearbeiten Sie Proben effizienter mit der LED-Deckelbeleuchtung des HORIZON: aus, wenn die Zentrifuge bereit ist, beladen zu werden, ein, wenn sie läuft und blinkend am Ende jedes Zyklus. Sobald das Gerät gestartet ist, zeigt die Anzeige die verbleibende Drehzeit an.

Röhrchenkapazität	6, 12, oder 24 (75-125 mm/0,5-50 ml)
Anwendungen	Biochemie, Koagulation, PPP, PRP, Urin
Zentrifugation	Horizontal (Max. 2.000 xg/3.800 U/min)
Enthalten	Rotor, Eimerchen und Röhrchenhalter
Gewährleistung *	2 Jahre (Rotor: lebenslange Gewährleistung)

* Erweiterte Gewährleistung ist verfügbar

Zuverlässig gebaut

Keine Routinewartung. Brushless-Motor, konstruierte Verbundkomponenten.

Sicherheit steht an erster Stelle

Schützen Sie Ihr Labor dank der Unwuchterkennung und einem bruchsicheren Deckel, der nur geöffnet werden kann, wenn der Rotor ruht, auch wenn das Gerät keinen Strom mehr hat.

Hoher Mehrwert

Unschlagbare Qualität für jeden Haushaltsplan. Jede HORIZON-Zentrifuge ist einsatzbereit mit einem horizontalen Rotor, Universal-Röhrchenhaltern und einer 2-Jahres-Gewährleistung zum günstigen Preis.



HORIZON 6 Flex




HORIZON 12 Flex



HORIZON 24 Flex

In den USA entwickelt und hergestellt. US-Support.

HORIZON 6, 12, & 24 FLEX

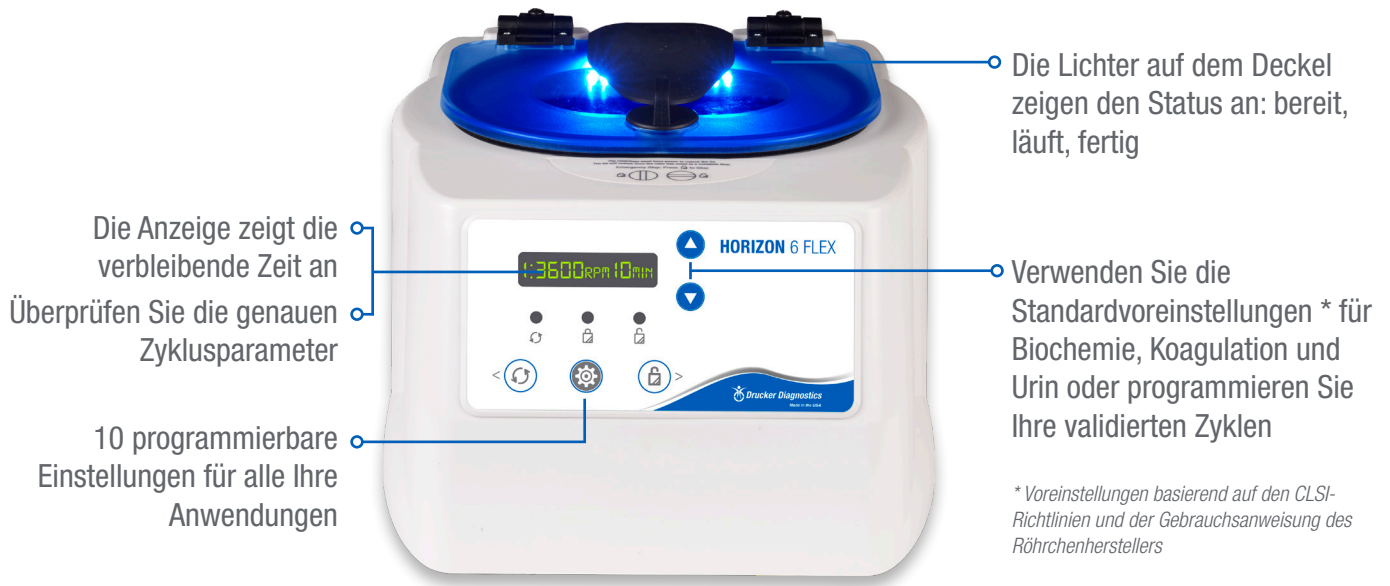

Teilenummern	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Zentrifuge	00-376-009-000	00-383-009-000	00-384-009-000
Ersatz 75-100 mm Röhrenhalter/Eimerchen	7713079 (1 St.)	7713079 (1 St.)	7713023 (1 St.)
50 mm-Röhrenhalter			7713037
Deckel			7713035
SmartView-Plattform	00-079-009-001		
1 Jahr Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
2 Jahre Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
3 Jahre Gewährleistungsverlängerung	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
Benutzerdefinierte Einstellungen*	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Fügen Sie diese Teilenummer zu Ihrer Zentrifugenbestellung hinzu, damit Ihre benutzerdefinierten validierten Zyklen im Werk vorprogrammiert werden können

Spezifikationen	HORIZON 6 Flex	HORIZON 12 Flex	HORIZON 24 Flex
Schallpegel	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Maximale G-Kraft/Geschwindigkeit	2.000 xg @ 3.800 U/min	2.000 xg @ 3.700 U/min	2.000 xg @ 3.400 U/min
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 x 14 x 9 Zoll 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 Zoll 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 Zoll 38 x 43 x 23 cm
Gewicht	12 Pfund (5,4 kg)	30 Pfund (13,7 kg)	39 Pfund (17,7 kg)
Leistung	von 95 bis 253 V – 50/60 Hz		

FDA GELISTET



RoHS
Compliant



ISO 13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

