

## DRUCKER MODELLO 614B

### CENTRIFUGA A SINGOLA VELOCITÀ E ANGOLO FISSO

Con una singola impostazione di forza g e un timer meccanico regolabile, la 614B offre flessibilità di tempo di esecuzione ed elaborazione ad angolo fisso ad un prezzo conveniente. Utilizzatela ovunque, i campioni sono analizzati in loco.

#### Un affare

Ogni centrifuga è pronta all'uso con rotore ad angolo fisso, portaprovette e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.

#### Semplice da usare

Impostate ogni volta senza errore, senza bisogno di selezionare tra una varietà di opzioni complicate. La 614B offre una singola impostazione di forza g di 1.100 xg e un quadrante meccanico facilmente regolabile con tempi di esecuzione tra 1 e 30 minuti.

#### Funzionamento refrigerato

Il design unico dell'alloggiamento del motore e la camera di rotazione mantengono i campioni freschi durante il processo.

#### Realizzato per durare


Godetevi anni di funzionamento senza manutenzione con i componenti rinforzati e il motore brushless della 614B.




#### Rotore ad angolo fisso incluso

Utilizzato per centrifugare provette da 75 mm, 100 mm e 125 mm in portaprovette appositamente progettati.

#### Angolo di carico

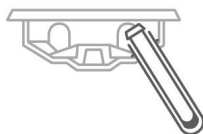

#### Angolo di rotazione

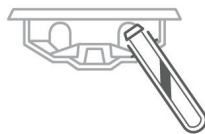

#### Centrifugazione ad angolo fisso vs centrifugazione orizzontale


Le centrifughe ad angolo fisso producono strati di gel che possono essere soggetti a rottura durante il trasporto. Questi campioni danneggiati devono essere nuovamente centrifugati, un processo che il CLSI sconsiglia a causa dei suoi comprovati effetti negativi sui risultati analitici. Per una migliore formazione dello strato di gel, specialmente per le provette che verranno trasportate, si prega di considerare la centrifugazione orizzontale con il **Modello 642E** o la serie **HORIZON**.

Provette	Applicazioni	Centrifugazione	Inclusi	Garanzia
6 75-100, 125 mm 0,5-15 mL	Biochimica Coag	Angolo fisso 1.100 xg RCF Max Max 3.250 giri/min	Rotore, cestelli, Portaprovette	2 anni Rotore: garantito a vita Estensione di garanzia disponibile

# DRUCKER MODELLO 614B

614B	Numeri di parte
Centrifuga	00-004-009-001
Portaprovette da 75-100 mm	7713079 (qtà: 1)
Portaprovette da 125 mm	7713032 (qtà: 1)
Piattaforma SmartView	00-079-009-001
Estensione garanzia di 1 anno	03-0-0007-0001
Estensione garanzia di 2 anni	03-0-0007-0002
Estensione garanzia di 3 anni	03-0-0007-0006

614B	Specifiche
Livello audio	55 dBA
Dimensioni	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	11 lb (5 kg)
Accelerazione massima	30 secondi
Decelerazione massima	40 secondi
Potenza	115 V – 50/60 Hz

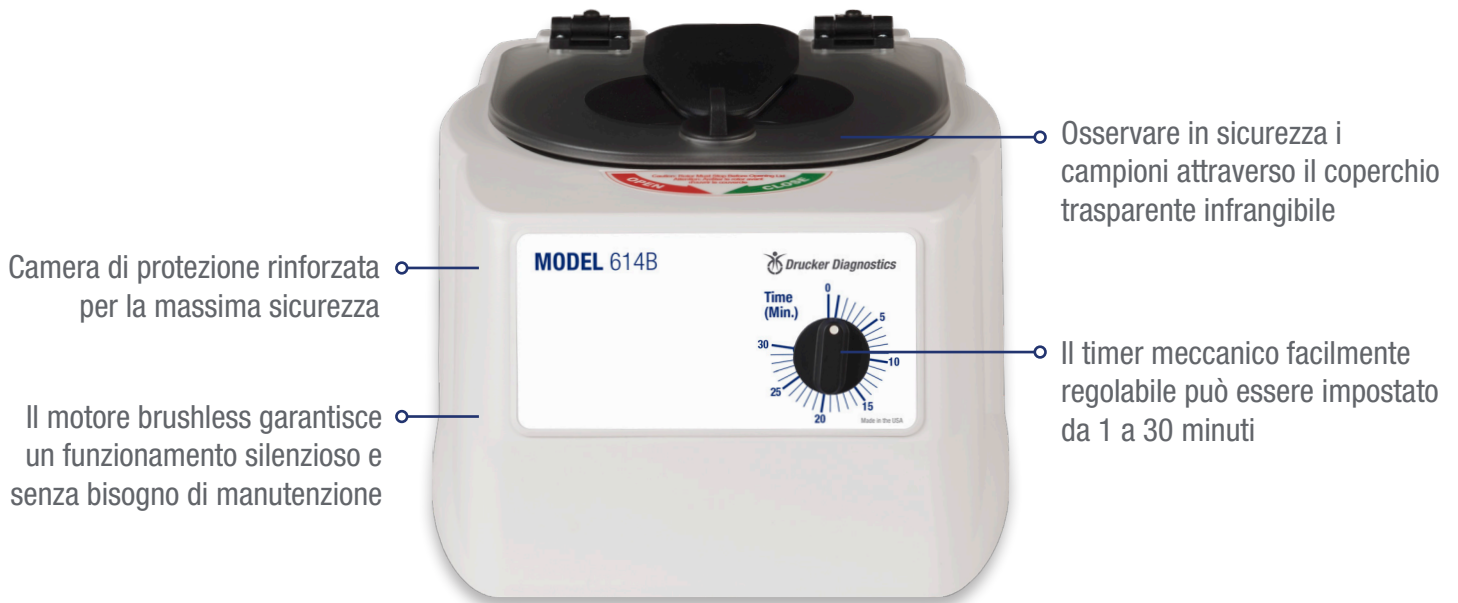

Camera di protezione rinforzata per la massima sicurezza

Il motore brushless garantisce un funzionamento silenzioso e senza bisogno di manutenzione

Osservare in sicurezza i campioni attraverso il coperchio trasparente infrangibile

Il timer meccanico facilmente regolabile può essere impostato da 1 a 30 minuti

## ALTRI MODELLI DRUCKER



### 642E

La centrifuga da laboratorio numero 1 al mondo  
Per sangue



### HORIZON 6 FA

3 cicli, capacità di 6 tubi  
Per sangue e urine



### HORIZON 6 Flex FA

Display digitale, capacità di 6 tubi  
10 cicli, per sangue e urine

ELENCATI  
DAL FDA



RoHS  
Compliant



ISO13485  
certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

