

## DRUCKER MODELLO 642E

### CENTRIFUGA ELETTRICA A **VELOCITÀ SINGOLA**

La 642E è la **centrifuga da laboratorio più venduta al mondo**. Il semplice funzionamento a due pulsanti garantisce riproducibilità e standardizzazione, mentre il design avanzato garantisce sempre una separazione del sangue di alta qualità. La sua velocità e il suo tempo di esecuzione preimpostati rendono la 642E la scelta ideale per una consistenza negli uffici dei medici, nei centri di assistenza ai pazienti e nelle sedi di sensibilizzazione.

#### Semplice da usare

Centrifugate i campioni con la sola pressione di un tasto. La 642E elabora provette da 75-100 mm (3-10 mL) per biochimica, coag e PPP.

#### Impostazioni semplici

La 642E presenta un tempo di esecuzione predefinito di 10 minuti a 1.600 xg per tutte le esigenze di biochimica più comuni.

#### Realizzato per durare

Nessuna manutenzione di routine. Il motore brushless e l'esclusivo sistema di raffreddamento basato sulla convezione garantiscono anni di separazioni di alta qualità.

#### Progettato per la sicurezza

Proteggete il vostro laboratorio con il coperchio trasparente infrangibile che si blocca fino a quando la centrifuga non è completamente ferma.

#### Un affare


Acquistate la centrifuga da laboratorio numero 1 al mondo a un prezzo che si adatta a qualsiasi budget. L'unità è pronta all'uso con rotore orizzontale, portaprovette e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.




#### Rotore orizzontale a 2 stadi

Il nostro design del rotore orizzontale oscillante brevettato incorpora un esclusivo portaprovette che produce campioni ideali orizzontalmente separati.

#### Angolo di carico

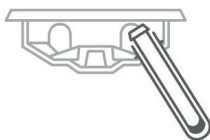

#### Angolo di rotazione

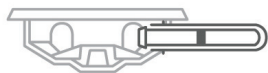

Provette	Applicazioni	Centrifugazione	Inclusi	Garanzia
6 75 & 100 mm 3-10 mL	Biochimica, Coagulazione, PPP	Orizzontale 1.600 xg RCF Max Max 3.400 giri/min	Rotore Portaprovette	2 anni Rotore: garantito a vita Estensione di garanzia disponibile

**Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti**

# DRUCKER MODELLO 642E


642E	Numeri di parte
Centrifuga	00-018-009-001
Portaprovette da 75-100 mm	7713079 (qtà: 1)
Piattaforma SmartView	00-079-009-001
Estensione garanzia di 1 anno	03-0-0007-0001
Estensione garanzia di 2 anni	03-0-0007-0002
Estensione garanzia di 3 anni	03-0-0007-0006

642E	Specifiche
Livello audio	64 dBA
Dimensioni	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	11 lb (5 kg)
Accelerazione massima	10 secondi
Decelerazione massima	20 secondi
Potenza	115 V – 50/60 Hz

Il coperchio di sicurezza si blocca automaticamente durante il funzionamento e non si apre fino a quando la centrifuga è ferma

Camera di protezione rinforzata per la massima sicurezza

Il motore brushless garantisce un funzionamento silenzioso e senza bisogno di manutenzione

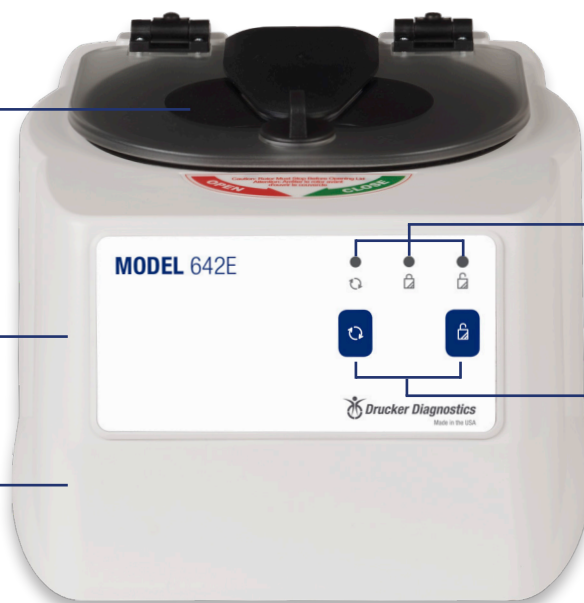

Le luci si accendono per indicare che la centrifuga è in funzione, bloccata o sbloccata

Controlli semplici a due pulsanti

## ALTRI MODELLI DRUCKER



### 642M

Per centrifugazione mobile  
Da utilizzare con presa da 12V



### HORIZON

3 cicli, disponibile per 6, 12, 24 tubi  
Per sangue e urine



### Contenitore di sicurezza SampleSafe™

Protezione del campione per 24 ore  
Modelli a carico dall'alto e frontale

ELENCATI  
DAL FDA



RoHS  
Compliant



ISO13485  
certified



druckerdiagnostics.com  
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

