

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12, & 24

CENTRIFUGHE DI ROUTINE IMPOSTA E BLOCCA

Riducete al minimo gli errori, riducete i tempi di formazione e fornite i migliori risultati con HORIZON. Impostate e bloccate i cicli convalidati per evitare modifiche accidentali. Riducete ulteriormente i potenziali errori con l'opzione per bloccare su un singolo ciclo.

Semplice da usare

Usate la semplice interfaccia a due pulsanti per selezionare un'impostazione predefinita o programma e memorizzate le vostre impostazioni convalidate sull'etichetta inclusa. Centrifugate provette da 75-125 mm (0,5-50 mL) nello stesso supporto senza cuscini.

Semplice da monitorare

Elaborare campioni in modo più efficiente con l'illuminazione del coperchio a LED di HORIZON: spento quando la centrifuga è pronta per essere caricata, acceso durante il funzionamento e lampeggiante alla fine del ciclo.

Realizzato per durare

Nessuna manutenzione di routine. Motore brushless, componenti composti progettati.

Progettato per la sicurezza

Proteggete il vostro laboratorio con il rilevamento dello squilibrio e un coperchio infrangibile che può essere aperto solo quando il rotore è fermo, anche se l'unità perde potenza.

Un affare

Qualità imbattibile per tutte le tasche. Ogni centrifuga HORIZON è pronta all'uso con rotore orizzontale, portaprovette universale e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.



| | |
|-------------------------|---|
| Capacità delle provette | 6, 12, o 24 (75-125 mm/0,5-50 mL) |
| Applicazioni | Biochimica, Coag, PPP, PRP, Urine |
| Centrifugazione | Orizzontale (2.000 xg/3.800 giri/min) |
| Inclusi | Rotore, cestelli e portaprovette, etichetta |
| Garanzia * | 2 anni (rotore: garanzia a vita) |

* Estensione di garanzia disponibile



HORIZON 6



HORIZON 12



HORIZON 24

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti


HORIZON 6, 12, & 24

Le spie del coperchio indicano lo stato del ciclo: pronto, in funzione, terminato

3 impostazioni predefinite di default* per biochimica, coag e urine

* impostazioni predefinite basate sulle linee guida CLSI e sulle istruzioni per l'uso del produttore di provette

Utilizzate le impostazioni predefinite o programmate i cicli convalidati utilizzando i 2 pulsanti

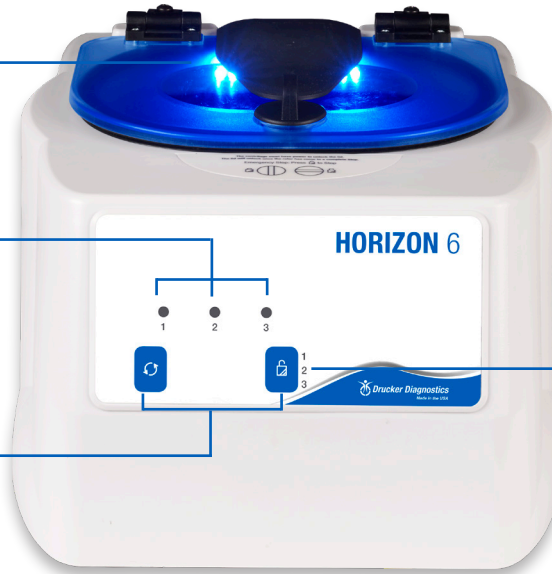

1. Chem 2. Coag 3. Urine

Rinominate i vostri cicli come preferite con l'etichetta cancellabile inclusa

- Premete per selezionare un ciclo
- Può essere bloccata su un singolo ciclo o personalizzata in laboratorio

| Numeri di parte | HORIZON 6 | HORIZON 12 | HORIZON 24 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Centrifuga | 00-276-009-000 | 00-283-009-000 | 00-284-009-000 |
| Sostituzione portaprovette o cestello da 75-100 mm | 7713079 (qtà: 1) | 7713079 (qtà: 1) | 7713023 (qtà: 1) |
| Portaprovette da 50 mL | | | 7713037 |
| Tappo | | | 7713035 |
| Piattaforma SmartView | 00-079-009-001 | | |
| Estensione garanzia di 1 anno | 03-0-0007-0001 | 03-0-0007-0001 | 03-0-0007-0001 |
| Estensione garanzia di 2 anni | 03-0-0007-0002 | 03-0-0007-0002 | 03-0-0007-0002 |
| Estensione garanzia di 3 anni | 03-0-0007-0006 | 03-0-0007-0006 | 03-0-0007-0006 |
| * Impostazioni personalizzate | 00-100-100-101 | 00-100-100-101 | 00-100-100-101 |

* Aggiungete questo numero di parte al vostro ordine della centrifuga per far sì che i vostri convalidati cicli personalizzati vengano preprogrammati in fabbrica

| Impostazioni predefinite standard | | HORIZON 6 | HORIZON 12 | HORIZON 24 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 (Biochimica) | 10 min a 1.800 xg | 3.600 giri/min | 3.500 giri/min | 3.300 giri/min |
| 2 (Coag, PPP) | 15 min a 1.500 xg | 3.300 giri/min | 3.200 giri/min | 3.000 giri/min |
| 3 (PRP, Urine) | 5 min a 500 xg | 1.900 giri/min | 1.800 giri/min | 1.700 giri/min |

| Specifiche | HORIZON 6 | HORIZON 12 | HORIZON 24 |
|------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| Livello audio | 64 dBA | 56 dBA | 59 dBA |
| Dimensioni (L x P x H) | 12 x 14 x 9 in | 13 x 15 x 9 in | 15 x 17 x 9 in |
| | 30 x 36 x 23 cm | 33 x 38 x 23 cm | 38 x 43 x 23 cm |
| Peso | 12 lb (5,4 kg) | 30 lb (13,7 kg) | 39 lb (17 kg) |
| Potenza | Da 95 a 253 V – 50/60 Hz | | |

ELENCATI
DAL FDA



RoHS
Compliant



ISO 13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

