

DRUCKER MODELO 614B CENTRÍFUGA DE ROTOR ÂNGULO FIXO DE VELOCIDADE ÚNICA

Com uma configuração de velocidade única e temporizador mecânico ajustável, a 614B proporciona flexibilidade no tempo de execução e processamento de ângulo fixo a um preço acessível. Use em qualquer lugar de as amostras são analisadas no local.

Um Grande Valor

Todas as centrífugas chegam completad para operar com rotor de ângulo fixo, porta-tubos e 2 anos de garantia, tudo isso a um preço acessível.

Fácil de Usar

Definição sempre correta, não há necessidade de selecionar entre uma variedade de opções complicadas. A 614B oferece uma configuração de velocidade única de força g de 1.100 xg e um mostrador mecânico facilmente ajustável com tempos de duração de 1 a 30 minutos.

Operação com Sistema de Ar

O desenho exclusivo da carcaça do motor e da câmara de rotação mantém as amostras fresca durante o processamento.

Feita para Durar


Desfrute de anos de funcionamento sem manutenção com os componentes reforçados da 614B e do motor sem escovas. A tampa transparente e inquebrável aumenta a segurança do laborator.




Rotor de Ângulo Fixo Incluído

Usado para centrifugar tubos de 75 mm, 100 mm e 125 mm em porta-tubos especialmente projetados.

Ângulo de Carregamento

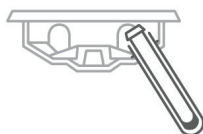

Ângulo de Rotação

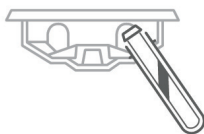

Ângulo Fixo x Centrifugação Horizontal


As centrífugas de Ângulo fixo produzem camadas de gel que podem ser suscetíveis à ruptura durante o transporte. Essas amostras deterioradas devem ser re-centrifugadas - um processo que a CLSI não recomenda devido a seus efeitos negativos conhecidos em resultados analíticos. Para melhor formação da camada de gel, especialmente para os tubos que serão transportados, considere a centrifugação horizontal com o **Modelo 642E** ou a série **HORIZON**.

Tubos	Aplicações	Centrifugação	Incluindo	Garantia
6 75-100, 125 mm 0,5-15 ml	Bioquímica, Coagulação	Ângulo Fixo 1.100 Max RCF 3.250 Max RPM	Rotor, Caçambas, Porta-tubos	2 anos Rotor: garantia vitalícia Garantia estendida disponível

DRUCKER MODELO 614B

614B	Números das Peças
Centrífuga	00-004-009-001
Porta-tubos de 75-100 mm	7713079 (1 qtd)
Porta-tubos de 125 mm	7713032 (1 qtd)
Plataforma SmartView	00-079-009-001
Extensão de Garantia de 1 ano	03-0-0007-0001
Extensão de Garantia de 2 anos	03-0-0007-0002
Extensão de Garantia de 3 anos	03-0-0007-0006

614B	Especificações
Nível de ruído	55 dBA
Dimensões	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	5 kg (11 lbs)
Aceleração Máxima	30 segundos
Desaceleração Máxima	40 segundos
Potência	115 V – 50/60 Hz

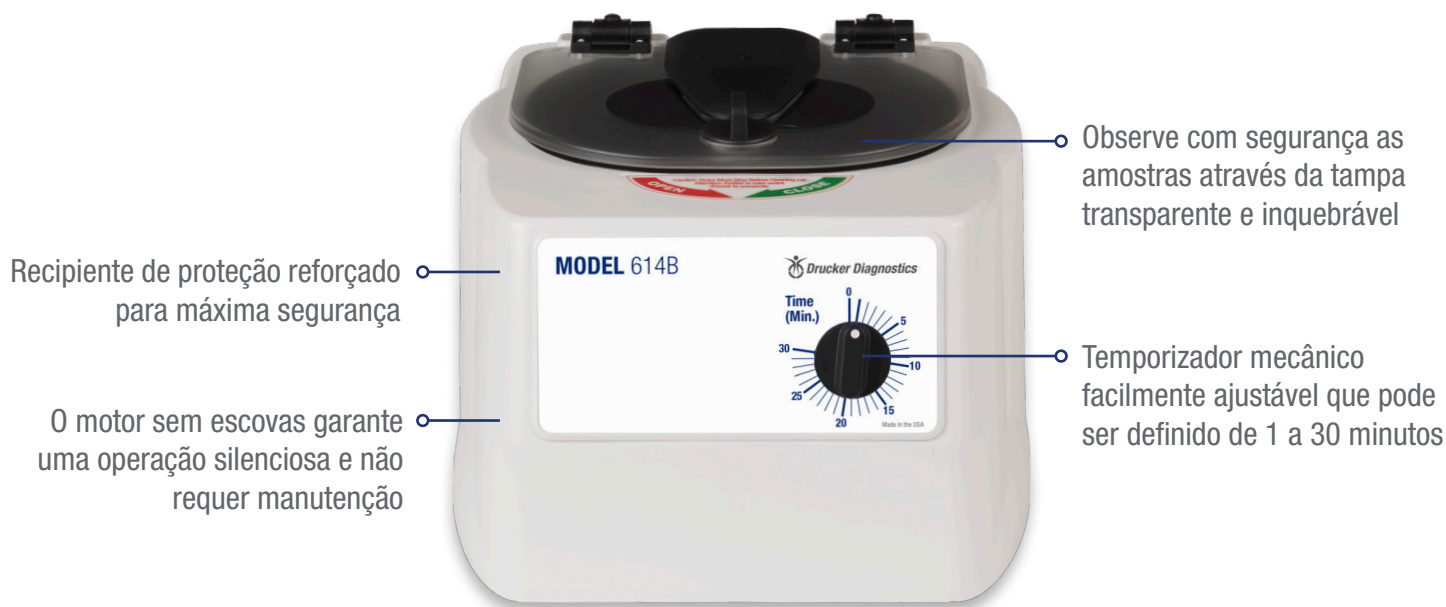

Recipiente de proteção reforçado para máxima segurança

O motor sem escovas garante uma operação silenciosa e não requer manutenção

Observe com segurança as amostras através da tampa transparente e inquebrável

Temporizador mecânico facilmente ajustável que pode ser definido de 1 a 30 minutos

OUTROS MODELOS DE DRUCKER



642E

Centrífuga para laboratórios clínicos nº 1 do mundo
Para sangue



HORIZON 6 FA

3 ciclos, capacidade de 6 tubos
Para sangue e urina



HORIZON 6 Flex FA

Mostrador digital, capacidade de 6 tubos
10 ciclos, para sangue e urina

**LISTADA
PELA FDA**



**RoHS
Compliant**



**ISO13485
certified**



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

