

DRUCKER MODELO 642E

CENTRÍFUGA DE VELOCIDADE ÚNICA **CON SET & LOCK**



A 642E é a **centrífuga para laboratórios clínicos mais vendida do mundo**. A operação fácil de dois botões garante repetibilidade e padronização, enquanto o desenho avançado proporciona sempre uma separação de sangue de alta qualidade. Sua velocidade e tempo de execução predefinidos tornam a 642E a escolha ideal para consistência em consultórios médicos, centros de atendimento a pacientes e locais de assistência.

Fácil de Usar

Amostras centrifugadas ao alcance de apenas um botão. A 642E processa tubos de 75-100 mm (3-10 ml) para bioquímica, coagulação, e PPP.

Configurações Simples

A 642E possui um tempo de execução predefinido de 10 minutos a 1.600 xg para todas as necessidades comuns de bioquímica.

Feita para Durar

Nenhuma manutenção de rotina, com um motor sem escovas e o exclusivo sistema de resfriamento por convecção garantem anos de separações de alta qualidade.

Projetada para Segurança

Proteja seu laboratório com a tampa transparente e inquebrável, que fica travada até que a centrífuga tenha parado completamente.


Um Grande Valor

Tenha a centrífuga para laboratórios clínicos nº 1 do mundo a um preço que se ajusta a qualquer orçamento. A unidade chega completa para uso com o rotor horizontal, porta-tubos e garantia de 2 anos, tudo isso a um preço acessível.


Rotor Horizontal de 2 Estágios

Nosso rotor horizontal oscilante com um desenho patenteado inclui um suporte para tubos de ensaio exclusivo, permitindo que as amostras permaneçam separadas horizontalmente, ideal para o transporte.

Ângulo de Carregamento

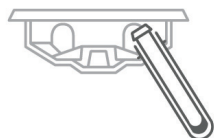

Ângulo de Rotação

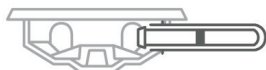


Tubos	Aplicações	Centrifugação	Incluindo	Garantia
6 75 e 100 mm 3-10 ml	Bioquímica, Coagulação, PPP	Horizontal 1.600 xg Max RCF 3.400 Max RPM	Rotor, Porta-tubos	2 anos Rotor: garantia vitalícia Garantia estendida disponível

DRUCKER MODELO 642E

642E	Números das Peças
Centrífuga	00-018-009-001
Porta-tubos de 75-100 m	7713079 (1 qtd)
Plataforma SmartView	00-079-009-001
Extensão de Garantia de 1 ano	03-0-0007-0001
Extensão de Garantia de 2 anos	03-0-0007-0002
Extensão de Garantia de 3 anos	03-0-0007-0006

642E	Especificações
Nível de ruído	64 dBA
Dimensões	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	5 kg (11 lbs)
Aceleração Máxima	10 segundos
Desaceleração Máxima	20 segundos
Potência	115 V – 50/60 Hz

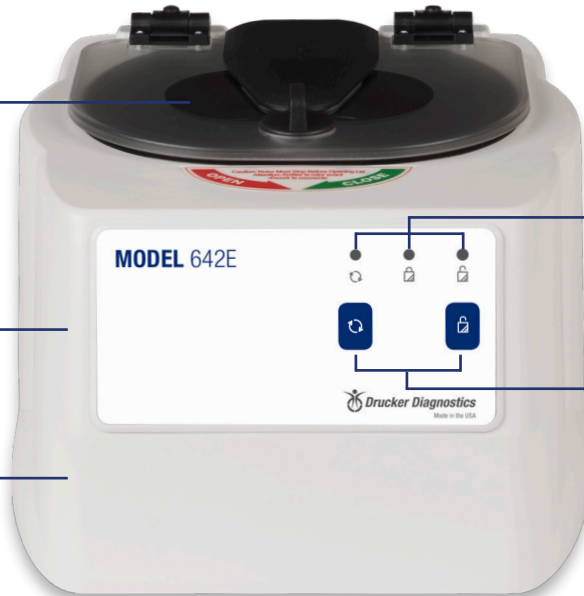

A tampa de segurança trava automaticamente durante a operação e não abre até que a centrífuga tenha parado

Recipiente de proteção reforçado para máxima segurança

O motor sem escovas garante uma operação silenciosa e não requer manutenção

A luz se acende para indicar funcionamento, bloqueada, desbloqueada

Controles simples de dois botões

OUTROS MODELOS DE DRUCKER



642M

Para centrifugação móvel
Para uso em tomada de 12V



HORIZON 6

3 ciclos, disponível para 6, 12, 24 tubos
Para sangue e urina



SampleSafe™ Lockbox

Proteção da amostra 24 horas
Modelos de carga superior e carga frontal

LISTADA
PELA FDA



RoHS
Compliant



ISO13485
certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

