

DRUCKER MODELO 642M

CENTRÍFUGA DE ROTOR HORIZONTAL, 12V DC MÓVEL



A 642M facilita rotas eficientes e permite maior alcance para flebotomistas móveis, proporcionando centrifugação no veículo. Centrifugue as amostras dentro de duas horas após a retirada e faça a rota mais conveniente sem a necessidade de retornar ao laboratório central. Acionada diretamente na fonte de alimentação de 12V de um veículo, a 642M fornece centrifugação horizontal para separação de tubos de gel de alta qualidade e operação com dois botões, para máxima repetibilidade.

Fácil de Usar

A interface simples executa o ciclo predefinido (10 minutos a 3.400 RPM/1.600 xg) com o toque de um botão. O tempo de operação pode ser ajustado de 1 a 30 minutos.

Projetada para Centrifugação Móvel

Com a centrifugação no veículo, os flebotomistas estão livres para planejar uma rota de um dia inteiro sem retornar ao laboratório. Este dispositivo acessível pode aumentar muito a gama de serviços e produtividade sem comprometer a qualidade da amostra ou o resultado do paciente.

Feita para Durar

Nenhuma manutenção de rotina. O motor sem escovas e o exclusivo sistema de resfriamento por convecção garantem anos de separações de alta qualidade.

Projetada para Segurança

Garantia de segurança máxima com a tampa transparente e inquebrável, que permanece travada até que a centrífuga tenha parado completamente.


Um Grande Valor

Todas as centrífugas da Drucker chegam prontas para funcionar com rotor horizontal, porta-tubos universal e garantia de 2 anos, tudo isso a um preço acessível.


Rotor Horizontal de 2 Estágios

Nosso projeto patenteado de rotor basculante inclui um suporte para tubos de ensaio exclusivo que produz amostras separadas horizontalmente, ideal para o transporte.

Ângulo de Carregamento

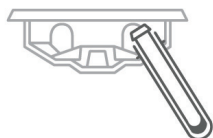

Ângulo de Rotação

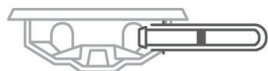


Tubos	Aplicações	Centrifugação	Incluindo	Garantia
6 75-100 mm (3-10 ml)	Bioquímica, Coagulação, PPP	Horizontal 1.600 xg Max RCF 3.400 Max RPM	Rotor, Porta-tubos	2 anos Rotor: garantia vitalícia Garantia estendida disponível

DRUCKER MODELO 642M

642M	Números das Peças
Centrífuga	00-077-009-000
Porta-tubos de 75-100 mm	7713079 (1 qtd)
Plataforma SmartView	00-079-009-001
Extensão de Garantia de 1 ano	03-0-0007-0001
Extensão de Garantia de 2 anos	03-0-0007-0002
Extensão de Garantia de 3 anos	03-0-0007-0006

642M	Especificações
Nível de ruído	65 dBA
Dimensões	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	12 lbs (5,4 kg)
Aceleração Máxima	10 segundos
Desaceleração Máxima	20 segundos
Potência	12V

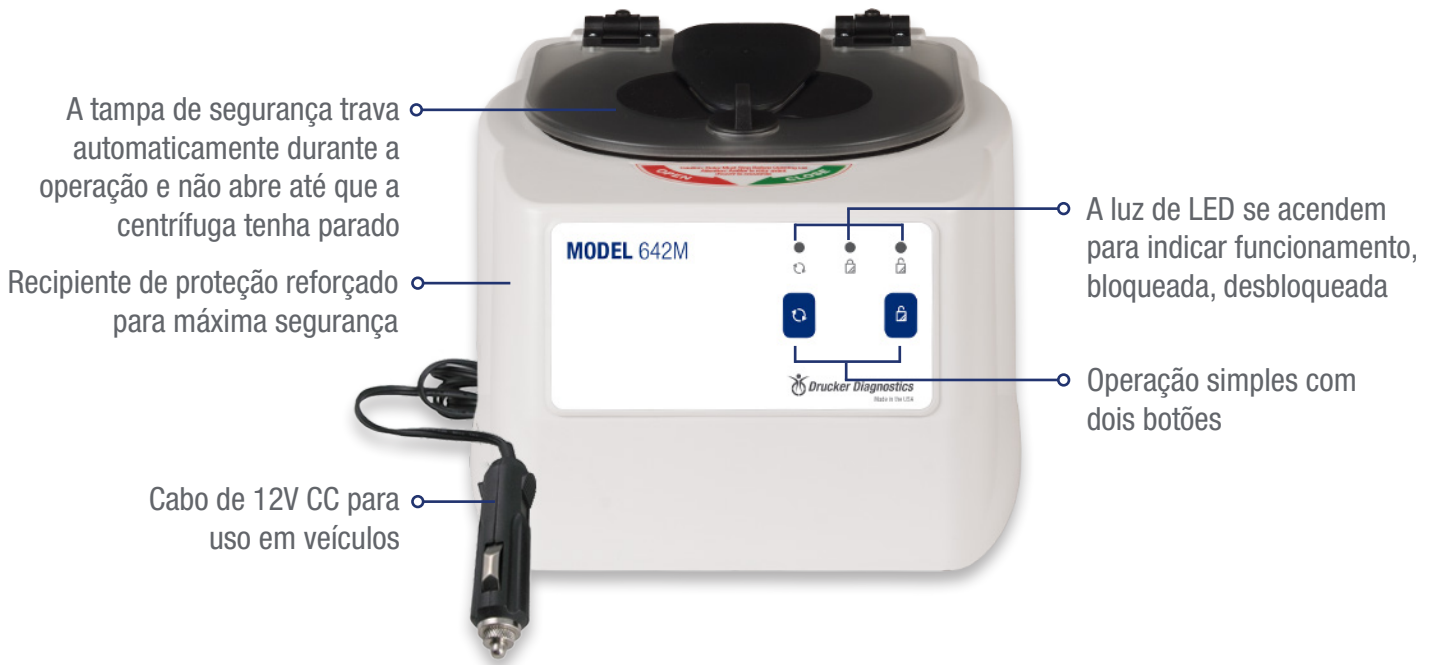

Protege ainda mais as amostras quando esta na estrada, com o Drucker SampleSafe™



Cofre com Carga Superior

Cofre com Carga Frontal

Temperaturas extremas podem inutilizar as amostras em apenas 15 minutos, o que representa um problema específico para flebotomistas móveis. O Drucker SampleSafe™ oferece uma solução. Mesmo quando armazenado em veículos quentes ou frios, o SampleSafe preserva a integridade da amostra por até 24 horas e permite que você alcance ainda mais pacientes.

SampleSafe™ com Carga Superior: P/N 00-071-009-000

SampleSafe™ com Carga Frontal: P/N 00-078-009-000

**LISTADA
PELA FDA**

**RoHS
Compliant**



**ISO13485
certified**



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

